


## 「ライザーベース専用ベルト」取扱説明書

このたびは、「ライザーベース専用ベルト」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの取扱説明書及びライザーベース本体の取扱説明書をよくお読みください。またこの説明書は必要ときに取り出しやすい場所に保管しておいてください。使用環境や使用者の身体状況が変化した際には再度お読みください。

### ●特徴

「ライザーベース専用ベルト」はライザーベースを使用して立ち上がらせたり、座らせたりする際のサポートとしてご使用できます。ベルトの中を通したストラップがスライドし、スムーズな動作を可能にします。ベルトはバックル式で装着・取り外しが容易に行えます。

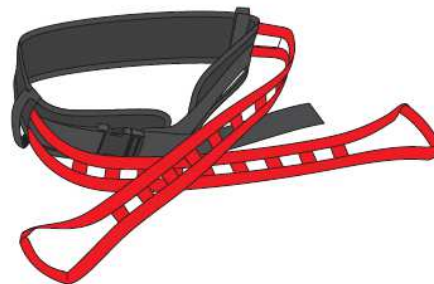

### 使用上の注意


ご使用にあたり理学療法士・作業療法士などの専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用してください。

- ・ 使用する前に必ず各部のほつれや破損が無いことを確認してからご使用してください。
- ・ ライザーベース専用です。その他機器では使用しないでください。
- ・ シャワーや浴室で使用しないでください。
- ・ 歩行には使用しないでください。
- ・ プラスチックバックル部の装着は、音が「カチッ」となるまで確実に留めてください。

### ●装着方法

ベルト本体部分をユーザーの腰に当て バックルを止めベルトを軽く締めます。

詳しくは、ライザーベース本体の取扱説明書を参照ください。

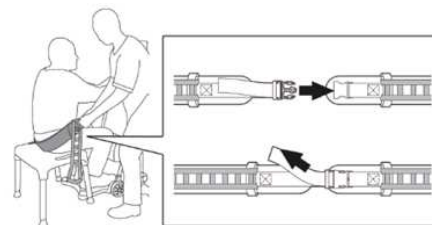

### ●洗浄方法

- ・ 80℃以下の温水または水で洗浄可能（柔軟剤のご使用はできません）  
（洗濯機ご使用の際はバックル保護のため、バックルを留めたままネットに入れて洗浄して下さい）
- ・ アイロンのご使用はできません。
- ・ タンブル乾燥機をご使用の際は低温で行ってください。

### ●商品規格

ベルト：83～140cm（ウエストサイズ目安）、幅 15cm

ストラップ：長さ 141cm

素 材：ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン、ポリウレタン

最大使用者体重：170 kg（ライザーベース本体の最大使用者体重）

商品に関するお問い合わせは

**ラックヘルスケア株式会社**

〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場 2-10-2 TEL06-6244-0636