


RKDシリーズ ロングフレーム 取扱説明書

854350-8900

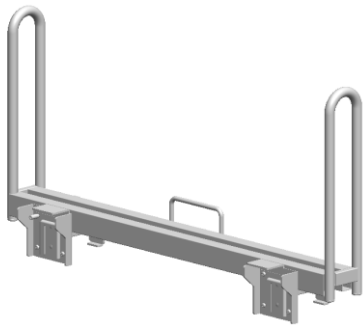

⚠ 注意

- 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してからご使用ください。
- 別紙のベッド本体の取扱説明書と一緒にご覧ください。
- お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように所定の場所に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

絵表示について

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しく使用していただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。

その指示と内容は、次のようになっています。

内容をよく理解してから本文を読んでください。

 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (～しないでください)
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 (～してください)
	この記号は、絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。

⚠ 警告

別紙のベッド本体の取扱説明書の内容をよくご覧いただき、そちらに記載の注意事項も合わせて、安全のため必ずお守りください。



延長した部分で、飛び跳ねたり、立ち上がったり、座ったりしないでください。
マットのすき間に足を挟んだり、部品が破損する原因となります。




⚠ 注意


必ず専用のロングサイズのマットレスと合わせてご使用ください。 マットレスについては弊社営業にお問い合わせください。	!
脚上げ機能を利用した際、マットレスの硬さによってはストッパーを乗り越えてしまう場合がございます。フットボードを利用するようにしてください。 マットレスがずれた際は直してください。 転落し、ケガをする恐れがあります。	!
ベッドに取り付けられた延長フレームを直接持ち上げないでください。 急に外れてケガをしたり、部品が破損する原因になります。	!

1. 取付方法


- ①フットボードとベッド本体に付属している脚側のマットエンドストッパー2ヶを外してください。マットエンドストッパーは延長フレームの裏側に収納できます。
- ②ロングフレームをボードブラケットに差し込んで取り付けてください。
自動でロックされますが、ロックが確実にされていることを必ず確認してください。

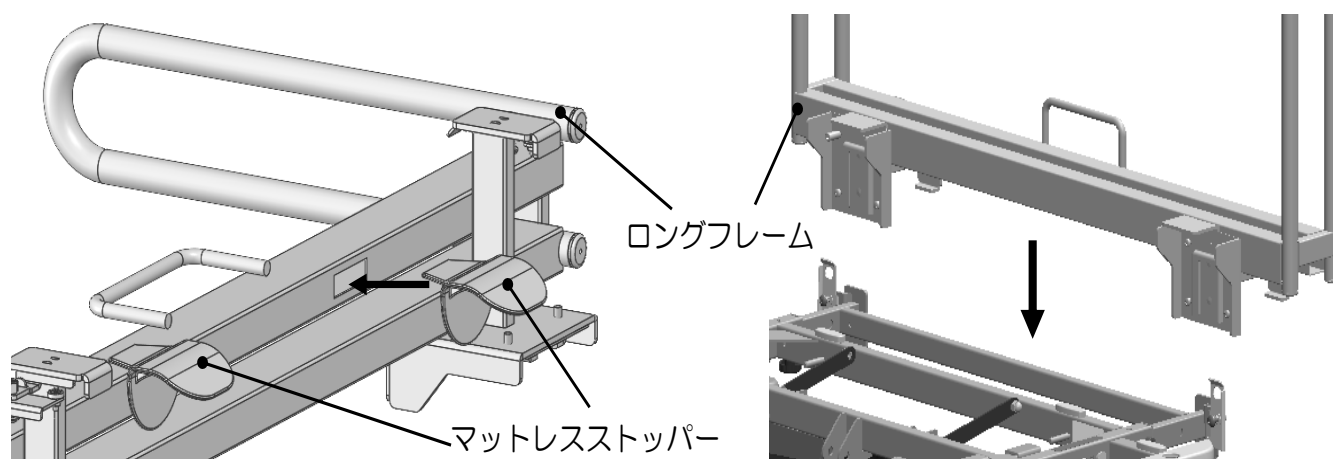

- ③外したフットボードをロングフレームのブラケットに差し込んで取り付けてください。
自動でロックされますが、ロックが確実にされていることを必ず確認してください。
- ④ロングサイズ（長さ 2090mm）のマットレスをご使用ください。

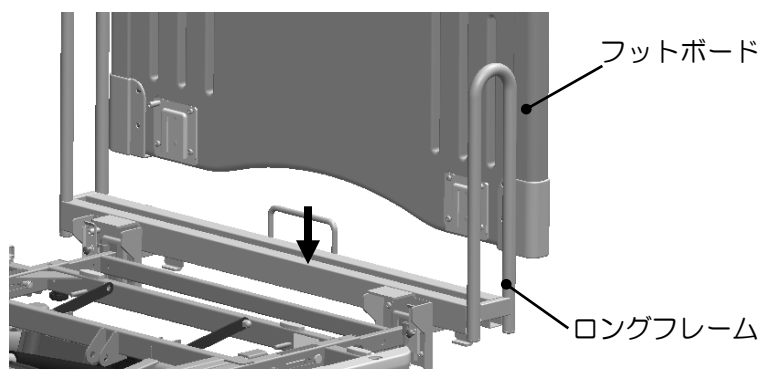

4. 仕様

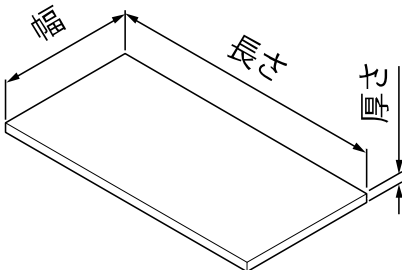寸法	幅 998mm×長さ 2157mm×ボトム高さ 250～610mm	
材質	鋼管（エポキシ樹脂粉体塗装）、樹脂成形品	
対応フレーム	RKD シリーズ	
対応マットレスの厚さ、重量		長さ : 2090mm 幅 : 910mm 最低厚さ : 30mm 最大厚さ : 190mm 重量 : 20kg 以下

5. 点検

長期にわたり本来の性能を維持するには日頃の点検等の適切な管理が必要となります。点検を行うことにより、大きなトラブルを防止し安心して使用することが出来ます。

外観点検項目：(a)目視あるいは手で外観の傷や変形などを確認します。(b)ネジやキャップが確実に取り付けられているか確認します。

使用中に不具合を発見された時には、ご使用を控えるか場合によっては使用を一時中断し、速やかに「販売店」または「お客様相談室」に故障状況を報告し、修理を依頼することが適切です。安易にご自身による故障の修理等は絶対に行わないでください。

6. お手入れ方法

乾いた柔らかい布で拭いてください。しつこい汚れがある場合は、家庭用クリーナー、または石鹸水で拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

⚠ 注意

汚れを拭き取るのに、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤を含んだものおよび、研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。市販のクリーナーを使用するときは、一度目立たない所で試してから使用してください。

変色、変質、傷、塗装がはげるなど商品を傷める原因となります。



● 消毒する場合

必ず下記の消毒剤を指定の濃度にし、各消毒剤の取扱説明書などに従ってご使用ください。

◆消毒用エタノール	・・・・・・・・ 76.9～81.4%
◆塩化ベンザルコニウム	・・・・・・・・ 0.05～0.2%
◆塩化ベンゼトニウム	・・・・・・・・ 0.05～0.2%
◆グルコン酸クロルヘキシジン	・・・・・・・・ 0.05%
◆次亜塩素酸ナトリウム	・・・・・・・・ 0.02～0.05%
◆加速化過酸化水素水	・・・・・・・・ 0.5%

7. アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記の弊社お客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、
お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社の商品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室まで問い合せください。

お客様相談室



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時 13時～17時

（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148-5