

FR-5861

K-CRUTCH

K クラッチ
4 in 1
松葉杖

1 本ですべての人に 最適な長さを。

上下 2 箇所の調節機能で S / M / L / XL サイズに対応。



4 in 1 デザイン

S ~ XL の 4 サイズに対応。身長に合わせてご使用できます。



分解せずに調節

最短 93cm から最長 143cm まで約 3cm 毎に調節可能です。(2 カ所)



簡単な在庫管理

子供から大人まで、この 1 本で済むため在庫スペースを軽減。

軽

軽量で頑丈


軽くて (780g) 持ち運びのしやすい、丈夫なアルミニウム製。

使いやすさを追求した 4 つのポイント



U 字型ワッシャー挿入 杖先ゴム

ゴムの破損を防ぎ、高い固定力で軸ズレを防止

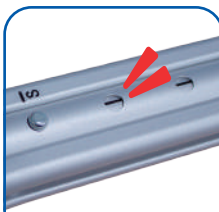


調節基準線を表示

調節ボタンの位置が迷いにくいガイド線



高耐久グリップ

人間工学に基づいた握りやすいグリップ

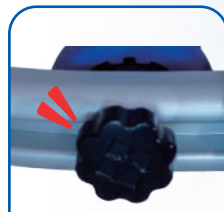

グリップボルト を使用

金属製蝶ネットのような突起がなく、ケガを防止

やさしさをカタチにした設計

やわらかい 脇あてカバー

脇への負担を軽減し、長時間使用でも快適。



脇あてカバー

品番	JAN コード
FR-5861-P1	4582465658638

◎メーカー希望小売価格 / 個
720 円 (税込 792 円)

頑丈なグリップ

グリップが空回りしない安定設計。



グリップセット

品番	JAN コード
FR-5861-P2	4582465658645

◎メーカー希望小売価格 / 個
800 円 (税込 880 円)

滑りにくい 杖先ゴム

ゴム製で滑りにくく、地面を支えます。



杖先ゴム

品番	JAN コード
FR-5861-P3	4582465658652


◎メーカー希望小売価格 / 個
400 円 (税込 440 円)

4 サイズ対応 (調節可能) 材質: アルミニウム

サイズ	推奨身長の見当 (cm)	杖全長 (cm)	耐荷重
S	約 135 ~ 150	約 93 ~ 104	130kg
M	約 150 ~ 165	約 110 ~ 116	
L	約 165 ~ 180	約 122 ~ 128	
XL	約 180 ~ 190	約 134 ~ 143	

※身長の見当は参考値です。体格や身体状況により異なります。

■韓国製 ■JAN コード: 4582465658614 ◎入数: 8 組 / ケース

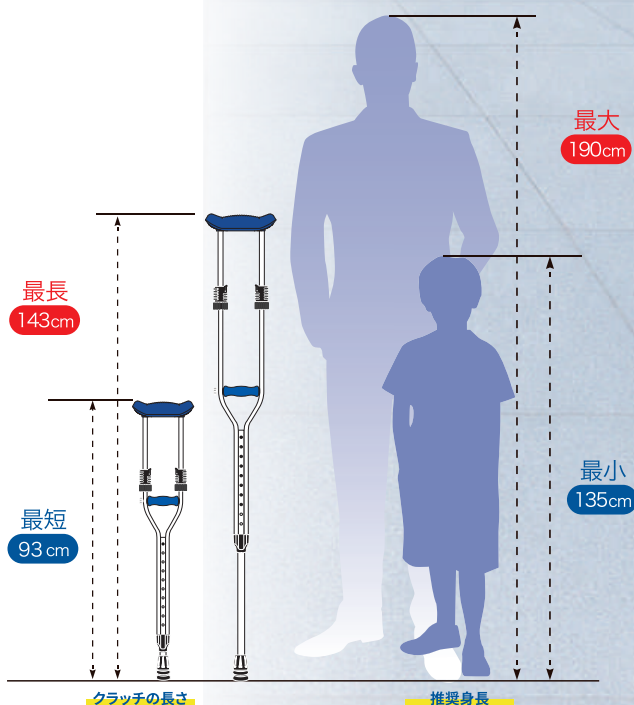

メーカー希望小売価格 / 組: 5,000 円 (非課税)



持ち運びも、収納も、ラクラク！

最短 93cm まで調節できるので、外出先での積み込みも簡単。

S ~ XL サイズに
対応する松葉杖


K-CRUTCH1 本で、
すべてのニーズに応えます。

K-CRUYCH


4in1
アルミ製
松葉杖

サイズ	推奨身長の目安	説明動画
S	約 135 ～ 150cm	 WEB サイトに入り ましたら JP (日本語) を選択してください。
M	約 150 ～ 165cm	
L	約 165 ～ 180cm	
XL	約 180 ～ 190cm	


この取扱説明書は、製品を安全にご使用いただくために必要な注意事項や正しい使用方法が記載されていますので、ご使用になる前に必ずお読みください。
 また、ご使用の際には必ず携帯していただき、必要なときにいつでもご覧いただけるよう大切に保管してください。

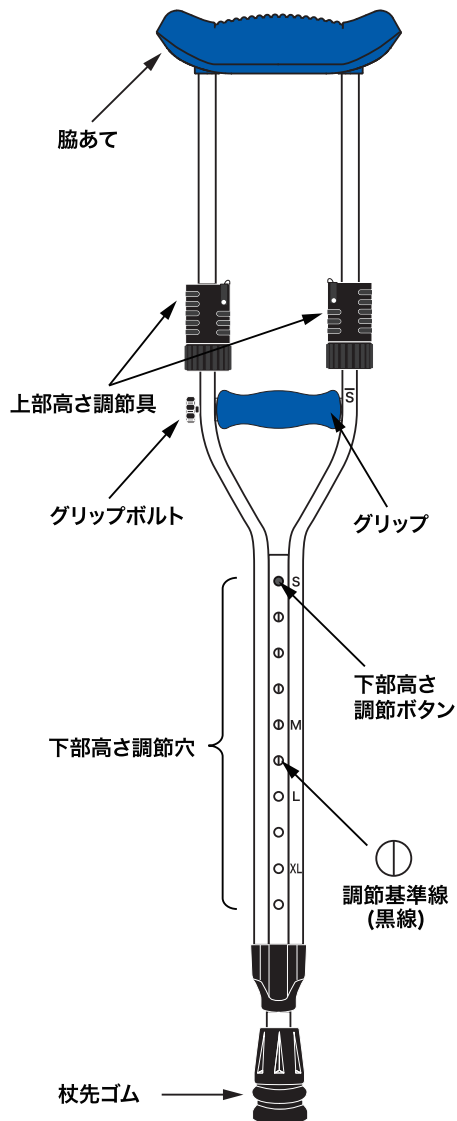

上部の高さ調節方法

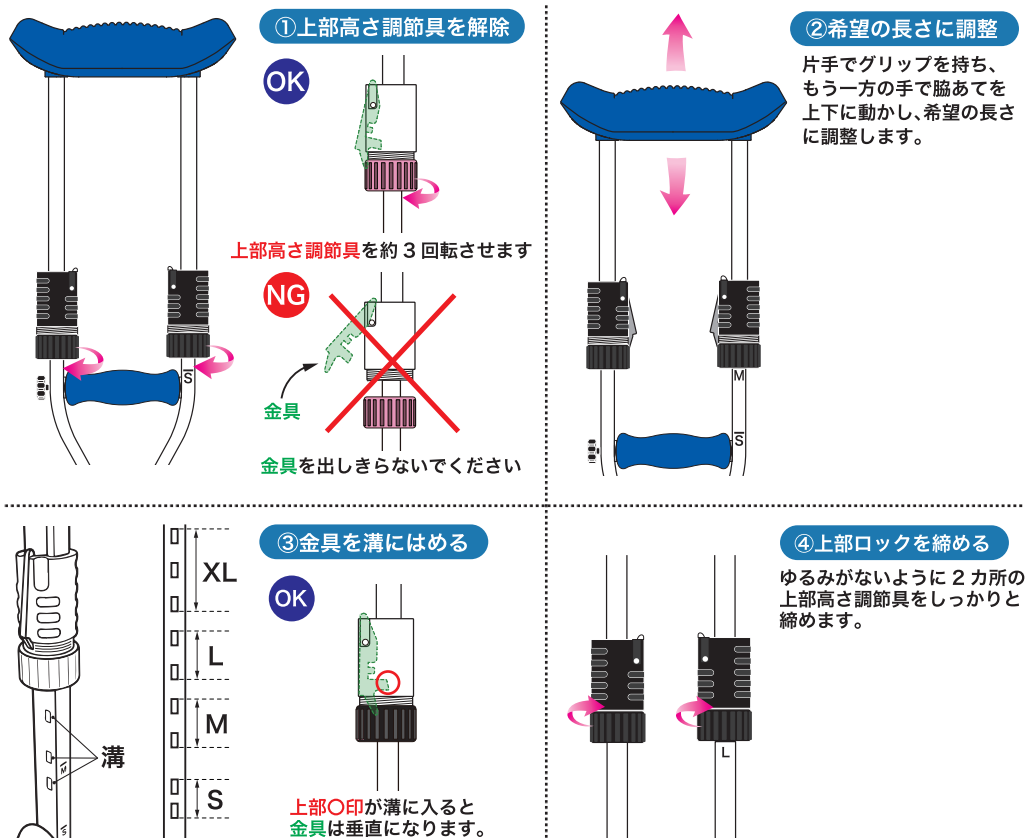



下部の高さ調節方法

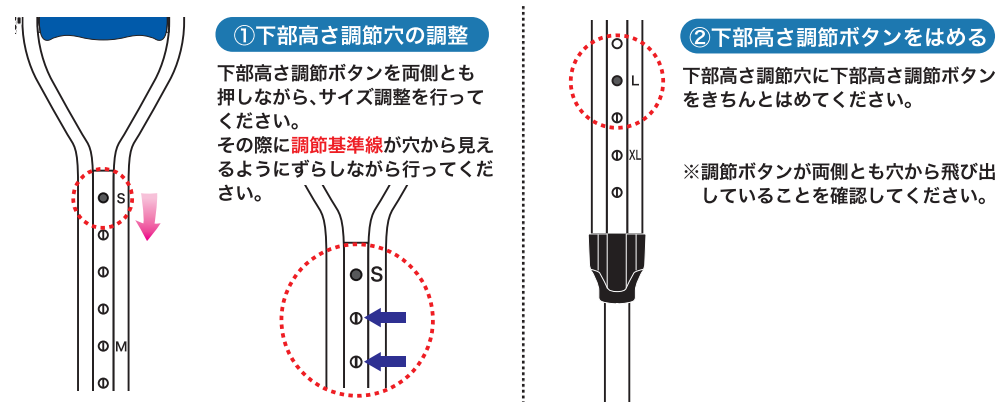


位置合わせ

※グリップボルトがしっかりと締まっていることを確認してください

1. つま先の方・側方 15cm の位置に杖先ゴムを置いてください。
2. 脇と脇あての間が約 5cm 程度の隙間になるように調整してください。
3. 軽く肘を曲げた状態 (約 35° ～ 45°) になるように調整してください。

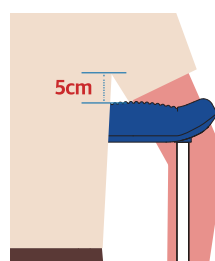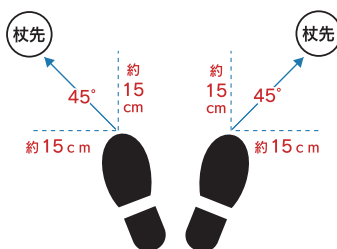

※上記は標準的な調整手順であり、身体状態によっては異なる場合があります。

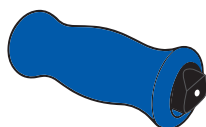① FR-5861-P1
脇あてカバー② FR-5861-P2
グリップセット③ FR-5861-P3
杖先ゴム

製品仕様

●適応身長：135～190cm ●耐荷重：130kg ●入数：2本/組

商品番号	色	サイズ	推奨身長 (cm)	杖全長 (cm)	重さ	品質表示<材質>
FR-5861	シルバー	S	約 135～150	約 93～104	780g (1本)	本体 アルミニウム、鉄
		M	約 150～165	約 110～116		脇あて 塩化ビニル樹脂
		L	約 165～180	約 122～128		グリップ 塩化ビニル樹脂
		XL	約 180～190	約 134～143		杖先ゴム 合成ゴム、鉄



使用上の注意

ご使用前、ご使用中、ご使用後に以下の点検を実施してください。

点検

1. 上部高さ調節具、グリップ、グリップボルト等の緩みがないこと
2. 下部高さ調節ボタンが両側とも穴から飛び出していること
3. 杖先ゴムに亀裂や著しい摩耗などの異常がないこと
4. 下部高さ調節ボタン、グリップ、使用されているビス等が濡れた場合は、乾いた柔らかい布等で水分を取り除いてください

保管場所

- 杖の劣化を避けるために以下に該当する場所には保管しないでください。
 - ①雨に濡れるようなところ
 - ②直射日光が当たるようなところ
 - ③湿気の多いところ
 - ④高温になるようなところ

お手入れ

- 汚れが気になる場合、水に濡らしたタオル等の柔らかい布を強くしぼり、泥やホコリを拭き取った後に乾いた布で拭いて水分を取り除いてください。
- 消毒用アルコール、次亜塩素酸水、揮発性剤（シンナー、ベンジン、アセトン）やクレンザー等の研磨剤は使用しないでください。



安全に関するご注意

- 本書をよくお読みにになり、お身体に合わせてお使いください。
- 身体に合わない状態、または違和感がある状態で使用し続けることで、健康を損なう恐れがありますのでご注意ください。
- 誤った取り扱いにより、傷害を負ったり、物的損害が発生する恐れがあります。
- 次に挙げるシーンでのご使用はお控えください。
(1) 凹凸の激しい道 (2) 夜間、雨や雪、風の強い日 (3) 凍結した道 (4) 深い砂利道や砂道
- ご使用前に、上部高さ調節具やグリップ、グリップボルトに緩みがなく、下部高さ調節ボタンが確実にハマっていることを必ず確認してください。



警告

- 改造・分解しないでください。
強度や耐久性の劣化に至り、事故の原因になる恐れがあります。
- 熱源や火気に本製品を近付けないでください。
変形したり、金属部分やゴムが熱くなり、やけどを負うことがあります。



注意

- 異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ご使用者の身体に合ったサイズでご使用ください。
- ご使用前、ご使用中、ご使用後に必ず点検を行ってください。
- 滑りやすい床面や濡れている床面では、不意に杖が動いて転倒の恐れがありますので、十分にご注意ください。
- 道路の側溝や凹みがある場所では杖先がハマり込む恐れがありますので、十分にご注意ください。
- 杖を投げたり、落としたり、衝撃を加えないでください。
- 湿気の多いところや雨風の当たるところに本製品を放置しないでください。

発売元

 First Rate Corporation

株式会社 ファーストレイト

〒373-0073 群馬県太田市緑町81-3 太田さくら工業団地内

Web: <https://www.first-rate.co.jp>

TEL 0276-56-4888 (本 社)

■東京支店 〒113-0023 東京都文京区向丘1-5-5
TEL 03-6801-8188

■わたらせセンター 〒373-0071 群馬県太田市原宿町3446-1 おおた渡良瀬産業団地内

■伊勢崎物流センター 〒379-2202 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町845-2

■鹿島物流センター 〒379-2202 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町755