


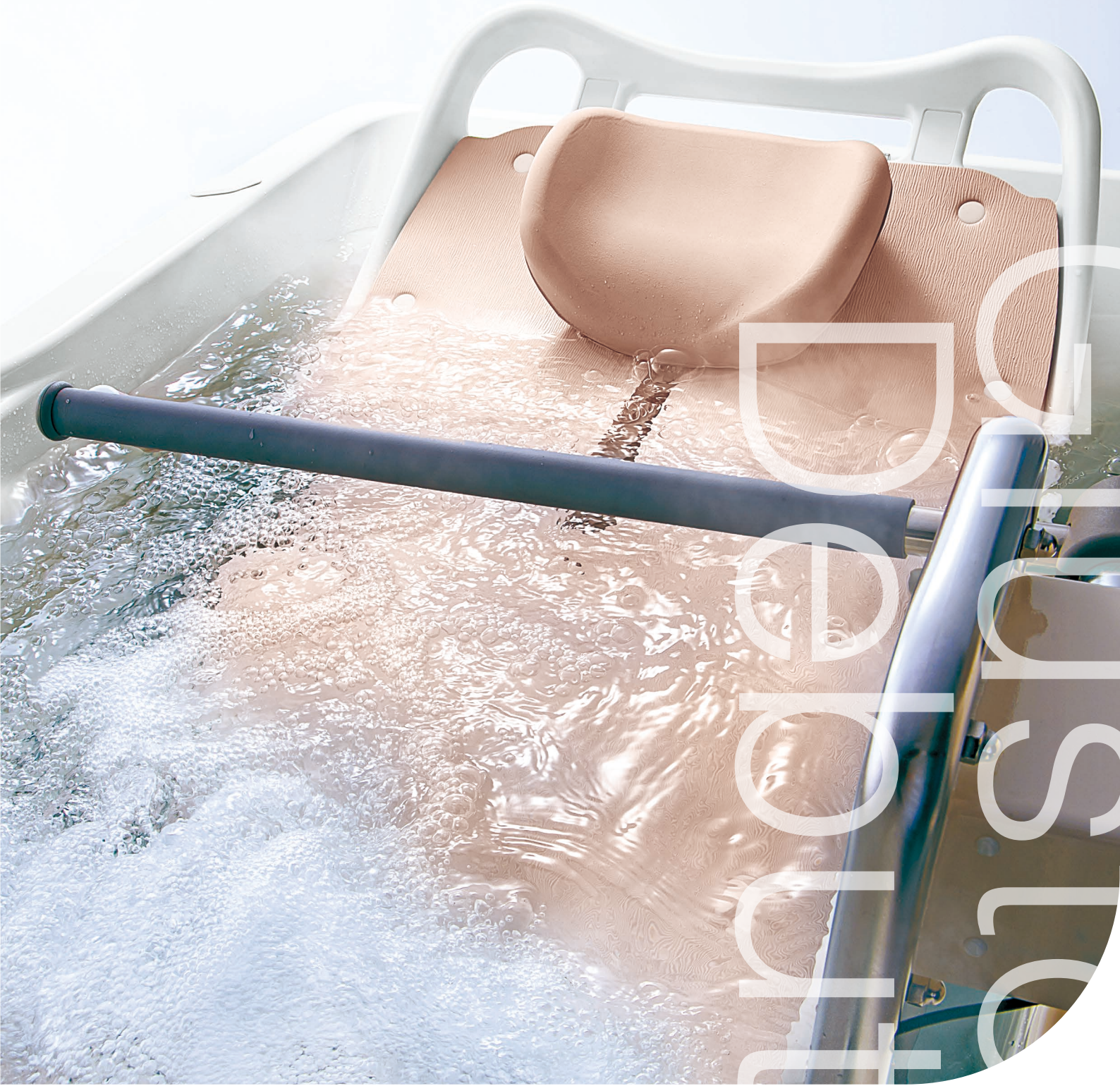

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴器

OG Wellness
Wellness and Beyond

オージー技研株式会社

オージーウエルネス

検索

【平日受付コールセンター】

0120-01-7181

受付時間 / 9:00~17:00

【休日受付コールセンター】○休日専用/土・日・祝・年末年始

0120-33-7181

受付時間 / 9:00~17:00

北日本支店 (宮城・山形・福島)
札幌営業所 (北海道)
盛岡営業所 (岩手・青森・秋田)
北関東支店 (埼玉・群馬・栃木・茨城)
新潟営業所 (新潟)
南関東支店 (東京・山梨)
横浜営業所 (神奈川)

千葉営業所 (千葉)
中部支店 (愛知・岐阜・三重・静岡・長野)
金沢営業所 (石川・富山・福井)
関西支店 (大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山)
神戸営業所 (兵庫)
中四国支店 (岡山・鳥取)
広島営業所 (広島・島根・山口)

高松営業所 (香川・愛媛・徳島・高知)
九州支店 (福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄)
鹿児島営業所 (鹿児島・宮崎)

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。 また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に"非課税"と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_819U

岡 山 本 社

〒703-8261 岡山県岡山市中区海吉1835-7

東 京 本 社

〒100-6004 東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング4階

取 扱 店

【ジューストデビュー】

Giusto Debut


HK-227

Giusto Debut


HK-227 【ジューストデビュー】

コンパクト設計でも 幅広担架で「ゆったり」入浴を実現


担架の幅が広いので、
大柄の方でもゆったり、
安全に入浴できます。

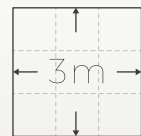

●最小 3×3m の浴室に設置可能

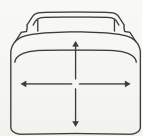

●幅がワイドに、高さがアップした浴槽

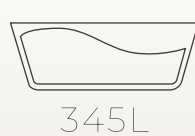

●実使用湯量約 345L

Operate

担架を下降させ、
寝たまま洗身・入浴

入浴方法

STEP 1 腰をかめずラクに移乗



大型搬送用取っ手と動きがスムーズな大型のキャスターで、介助者ひとりでも安全に搬送できます。

STEP 2 ブレーキペダルを踏み、ストレッチャーを固定



「一括ブレーキ」でキャスターロックを一つひとつかける手間なく、簡単にブレーキがかけられます。

STEP 3 担架を下降させて入浴



リモコン操作で担架を下降させて入浴します。担架の幅が広いのでゆったり入浴できます。

多彩な機能で 安心・快適入浴を実現



レジオネラ菌が発生しにくい「ジェット噴流」を搭載

FEATURES

POINT 02

安全な入浴をサポートし、
介助者の負担を軽減します。

自動給湯停止機能※

設定温度で自動給湯。湯量や温度を気にする必要がないため、
介助者は洗身に集中できます。

ボタン
ひとつで
適量給湯



担架の下降を停止

浴槽内の湯が高温の場合
担架の下降を停止します。



増し湯温度に注意してください。

音声や報知音による注意喚起

湯温注意のアナウンスと報知音で、
安全な介助をサポートします。




操作パネルの表示

給湯、増し湯、ハンドシャワーはそれぞれ独立した湯温調整
ができます。また、湯温表示の点滅で高温を知らせ、事故を
防ぎます。

POINT 01

幅がワイドに、
縁が高くなって、
入浴も介助も
しやすくなりました。

ゆったり
設計

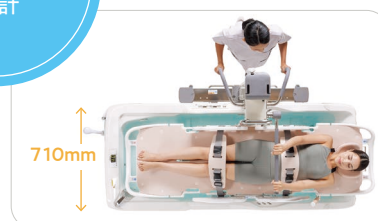

コンパクト設計でありながらワイドな浴
槽で、大柄な方でもゆったりと入浴でき
ます。



旧タイプ(HK-217)より70mm、浴槽縁
を高くしているため、ラクな姿勢で介助
できます。

移乗や入浴時の 介助者の負担を軽減する ストレッチャー

入浴者の体型に関係なく、
安全に搬送や洗身・入浴ができます。

操作しやすい大型搬送用取っ手で、介助者ひとりでもスムーズに搬送できます。また、担架の幅が広いので、ゆったり洗身・入浴ができます。


身長 180cm、体重 110kg まで。

ストレッチャーの支柱を
短くして視野を広げ、
介助のしやすさを追求。

介助者の視野を広げる
支柱




浴槽縁から支柱先端までの長さは
300mmと短いため、介助者の視野
を広げることができます。

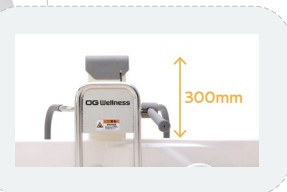

リモコン操作で
カンタン昇降

昇降式ストレッチャー
RA-227

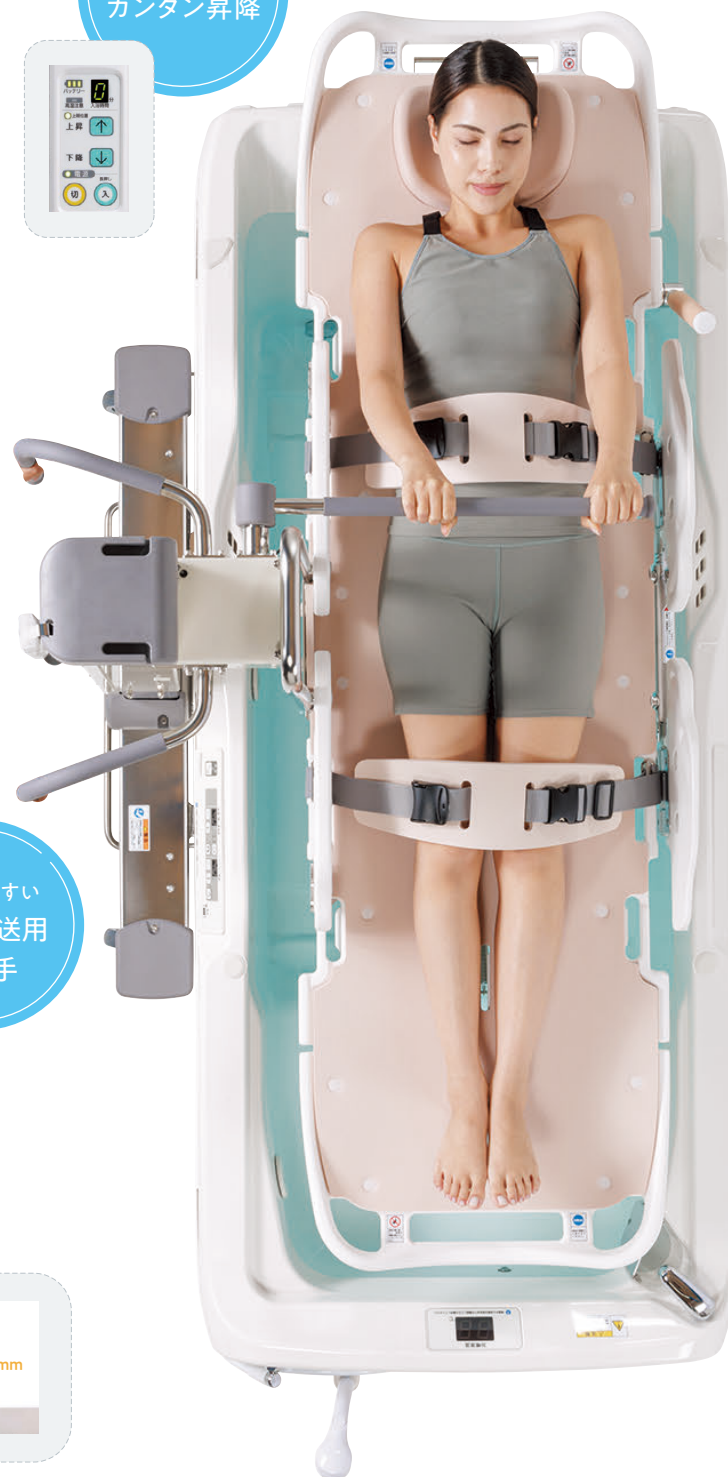

操作しやすい
大型搬送用
取っ手

1950mm

580mm

落下やずり込みを防止する
安心機能を搭載



大型サイドフェンス 落下防止ガード

落下を防ぐ
大型サイドフェンス / 落下防止ガード

洗身時や搬送時の入浴者の安全を確保し、
安心して介助できます。



臀部のずり込みを防ぐ
チルト機構

足元が上がることで、臀部のずり込みを
防止。安全な入浴姿勢をサポートします。

洗身スペースを確保でき、
入浴と洗身の
動線もスムーズです。

狭小浴室でもストレッチャーを入れて洗身ま
でできます。洗身と入浴の動線がスムーズに
なり、効率よく介助できます。

最小
3×3mの
浴室に設置可能



仕様 [HK-227]



ジュストデビュー

HK-227L-U1 ¥2,260,000(税別)
HK-227P ¥1,100,000(税別)

型番	HK-227L/HK-227P		
外形寸法	2080(L)×890(W)×840(H)mm(縁の高さ：770mm)		
浴槽内寸法	1900(L)×710(W)×500(D)mm		
質量	HK-227L	120kg	
	HK-227P	90kg	
電源電圧	単相 100V 50/60Hz ※HK-227Lのみ		
消費電力	200W(50Hz)、300W(60Hz) ※HK-227Lのみ		
主な材質	浴槽 / 外装：FRP、フレーム：ステンレス、主要部品：ステンレス		
機能・性能	噴流機能・ハンドシャワー 1基・自動給湯停止機能 ※HK-227Lのみ		

HK-227L

〈標準付属品〉

浴槽洗浄剤	SA-1	1本
ビューラックス-S 600ml	PLS-600	1本
取扱説明書		1部
安全ラベル(大)		1枚
入浴事故防止ラベル		1枚

HK-227P

〈標準付属品〉

浴槽洗浄剤	SA-1	1本
ビューラックス-S 600ml	PLS-600	1本
ホースクリップ(ホース外径φ19用)		2個
ホースクリップ(ホース外径φ24用)		2個
取扱説明書		1部
安全ラベル(大)		1枚
入浴事故防止ラベル		1枚

消耗品 [HK-227]



	品名	品番	数量	価格	
01	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)	
02	ビューラックス-S 600ml	PLS-600	1本	¥750(税別)	(軽減税率対象商品)
03	シャワーヘッド	HK255-012	1基	¥7,200(税別)	※HK-227Lのみ

組合せ例

ジュストデビュー	HK-227L-U1	1台	¥2,260,000(税別)
昇降式ストレッチャー	RA-227RまたはL	1台	¥3,200,000(税別)
合計			¥5,460,000(税別)

仕様 [RA-227]



昇降式ストレッチャー


RA-227R (右入れ仕様) ¥3,200,000(税別)
RA-227L (左入れ仕様) ¥3,200,000(税別)

型番	RA-227	
外形寸法	1950(L)×1030(W)×1070~1550(H)mm	
質量	125kg	
電源電圧	DC24V (12V 7.2Ahr バッテリー×2)	
主な材質	サイドフェンス、担架:ポリプロピレン	
	フレーム:ステンレス、主要部品:ステンレス	
機能・性能	担架ロック金具・安全ベルト・サイドフェンス・落下防止ガード	
	抗菌パット・抗菌マット・抗菌ヘッドレスト・アジャスターロック	

〈標準付属品〉

マット外し	RA735-001	1個
充電用アダプタ		1個
取扱説明書		1部

消耗品 [RA-227]

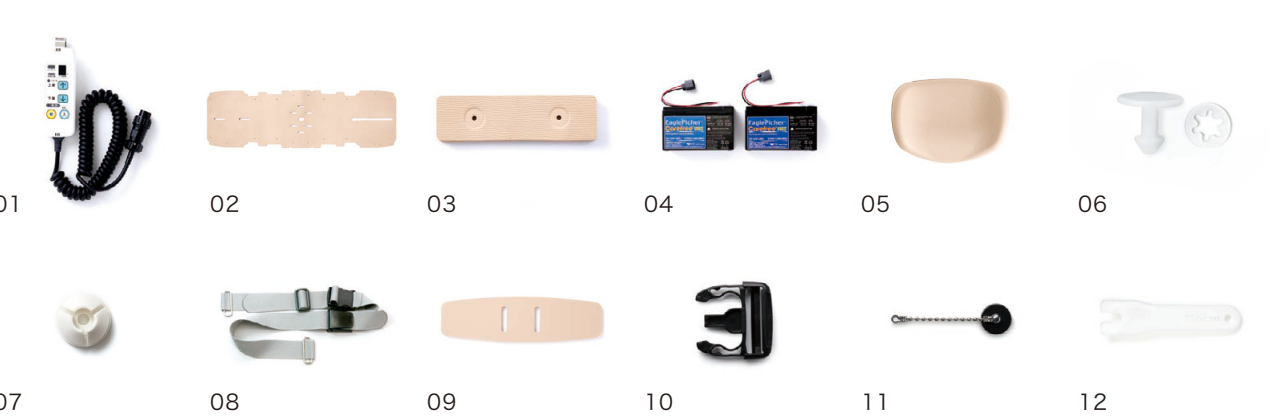

	品名	品番	数量	価格
01	リモコン	RA227-001	1個	¥65,000(税別)
02	スポンジマット	RA227-008	1枚	¥28,000(税別)
03	スポンジマット(小)	RA227-009	1枚	¥6,000(税別)
04	バッテリー	RA255-001	2個セット	¥37,000(税別)
05	ヘッドレスト	RA355-014	1個	¥35,000(税別)
06	クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
07	クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
08	安全ベルト	RA345-002	1本	¥9,000(税別)
09	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
10	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
11	充電口キャップ	RA255-005	1個	¥3,400(税別)
12	マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)


※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。




SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類	…	無機抗菌剤
加工方法	……………	練込
加工部位	……………	マット
登録番号	……………	JP0123356X0001C


Giusto Debut ジュストデビュー [HK-227]

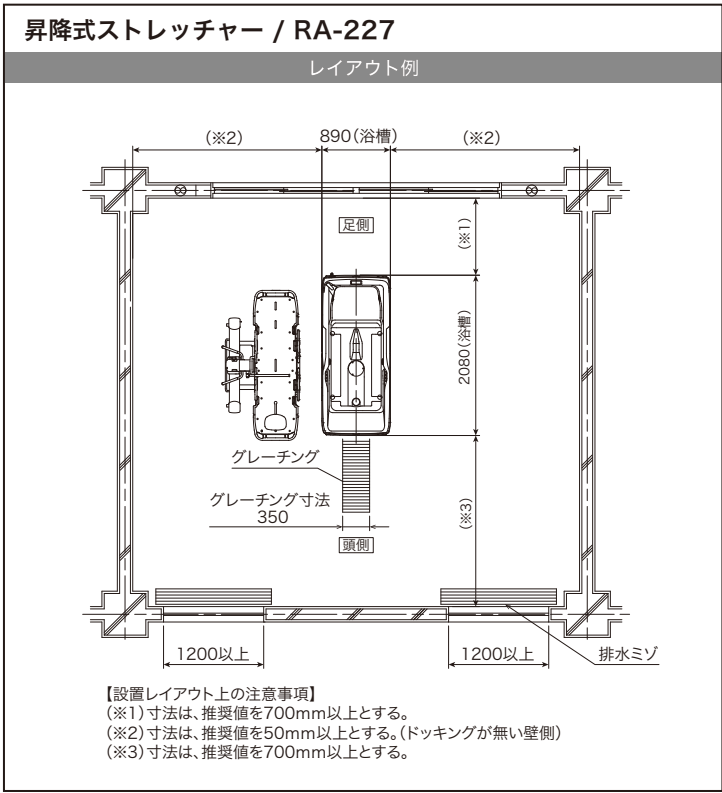

設置条件	
給湯 給水送り 配管	サイズ…20A、ボールバルブ止め。 (ボールバルブ向きは設置工事図を参照のこと) 床からの立ち上げ代…FL+115mm以下(ボールバルブ上端) 150～300kPa(同圧となるようにすること) 給湯・給水圧が300kPaを超える場合は、止水バルブに減圧弁を入れ、 150～300kPaに減圧すること。 給湯・給水流量…各30L/min以上、給湯温度…55～70℃(末端温度)
電源	単相100V、50/60Hz、20A、アース付き 漏電遮断器…単相100V、20A(感度電流:30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること) 開閉器…単相100V、20A(FL+1500mm以上) (浴室外のすぐに操作できる位置へ設けること) アース線はD種の規定に準ずること。
電線	電線…単線1mmまたは、より線0.75mm ² ×3芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)
PF管	床面より300mm立ち上げ通線し、電線は管端より1000mm以上出す。 PF管と床の防水処理を行うこと。
水勾配	[] で示した範囲は、1/100以下の水勾配とし、 同一勾配とする。(※部寸法)
排水	ビッド排水(溝の深さは150mm以上)、溝内に排水口を設けること。 トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力200L/min以上確保のこと。
ボイラー能力	48,000kcal/h(ボイラー号数:32号相当)以上のこと。 指定したボイラーの能力以下の場合、給水温によっては、 貯湯時間とシャワー吐出量に支障が生じる場合があります。 (※電気給湯器使用時は入浴回数によって異なる為、別途問い合わせ必要)

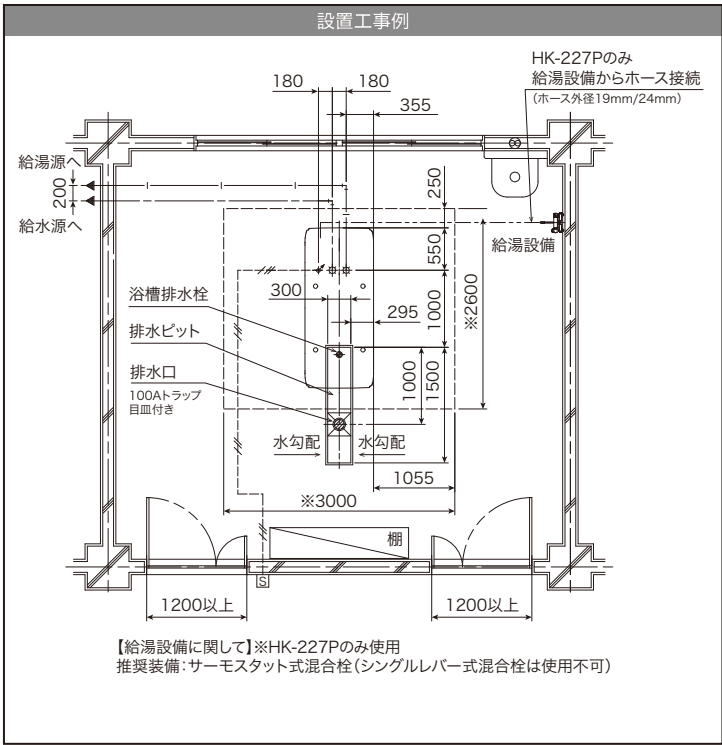


■アジャスター位置詳細

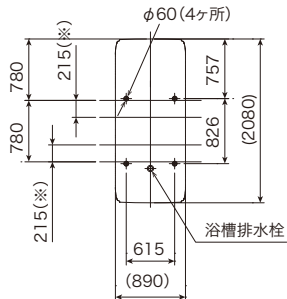

(※)ストレッチャー用キャスター走行範囲。この範囲は、床面に凹凸なきこと

■給湯/給水配管(例)

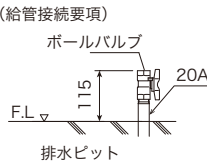

■排水ビッド

