

物理療法機器・リハビリ機器・介護用入浴機器

OG Wellness オージー技研株式会社

【平日受付コールセンター】
 **0120-01-7181**
受付時間 / 9:00～17:00

【休日受付コールセンター】○休日専用/土・日・祝・年末年始
 **0120-33-7181**
受付時間 / 9:00～17:00

北日本支店（宮城・山形・福島） 札幌営業所（北海道） 盛岡営業所（岩手・青森・秋田） 北関東支店（埼玉・群馬・栃木・茨城） 新潟営業所（新潟） 南関東支店（東京・山梨） 横浜営業所（神奈川）	千葉営業所（千葉） 中部支店（愛知・岐阜・三重・静岡・長野） 金沢営業所（石川・富山・福井） 関西支店（大阪・京都・滋賀・奈良・和歌山） 神戸営業所（兵庫） 中四国支店（岡山・鳥取） 広島営業所（広島・島根・山口）	高松営業所（香川・愛媛・徳島・高知） 九州支店（福岡・大分・熊本・長崎・佐賀・沖縄） 鹿児島営業所（鹿児島・宮崎）
---	---	---

○表示の価格等は物価変動等により変更する場合があります。 また、本カタログの記載価格は消費税抜きであり、消費税非課税物品につきましては、価格の後に"非課税"と記述しています。
○印刷インク等の都合上、記載写真と現品の色が多少異なる場合がありますのでご了承ください。 ○仕様および外観等は改良のため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

本カタログの記載内容は2025年4月現在のものです。

S48_2503_820X

Tenuto

テヌート

HK-730

1

さまざまな入浴スタイルにマルチに対応 直接入浴も搬送車による入浴も安心・安全です



直接入浴

自立した入浴ができる方も快適



一般的な家庭の風呂に近い印象のあるデザイン。「機械浴には抵抗がある」という方にも、より心地よい入浴を楽しんでいただくことができます。

サポート付きの入浴でも安心

[アイランド設置の場合のみ]



浴槽をまたぐときに座面として利用できるスペースが4か所あるため、一人ひとりの状態に合わせた安全な入浴をおこなうことができます。

入浴用シート



直接入浴時にリフト部を隠すため入浴用シートを採用。入浴時の機能として手すりを設けているため安全に入浴ができます。(特許第6544904号)

搬送車入浴


搬送車による入浴で介助もラクラク

簡単4ステップ



入浴者を乗せたまま搬送車とドッキングし、搬送車のシート部が浴槽側にスライドします。安全に浴槽内に入浴できるので、介助の負担も軽減。浴槽は「直接入浴」⇔「搬送車入浴」の切り替えが簡単なので、スムーズに入浴できます。

リモコン

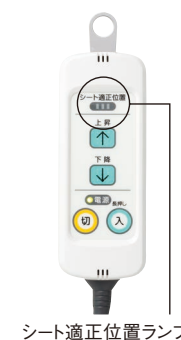

安全に入浴するため、リモコンにはシート適正位置ランプを搭載。搬送車のシート部がセンターでロックされた際に点灯し、入浴が可能になります。

2 移乗や入浴時の安全性を高め 入浴者・介助者の負担が少ない搬送車



RA-731



RA-735

大型の背もたれ



姿勢を安定させる大型の背もたれで安全に入浴をおこなうことができます。

足元ひろびろでスムーズ移乗



搬送車の足元に広いスペースを確保。移乗時の立ち上がりをスムーズにおこなうことができます。

安心感のあるフットレスト




フットレストのポジションは、入浴者が足を乗せたままでも変更可能。浴槽へのスライド、入浴作業を安全におこなうことができます。

大柄な方でも快適なレッグレスト




レッグレストの長さを10%アップ。
170cm程度の大柄な方でも足を伸ばして快適にご入浴いただけます。

足元までしっかりケアできるシートの昇降機能 [RA-735のみ]

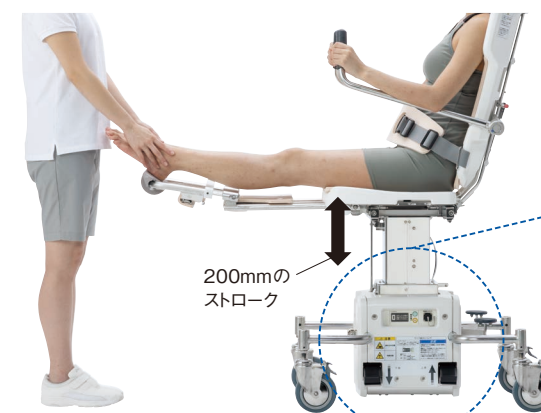

座面の高さ約454～654mmまで昇降。無理な姿勢を取らずに介助できます。

足元の操作で昇降するフットスイッチ [RA-735のみ]


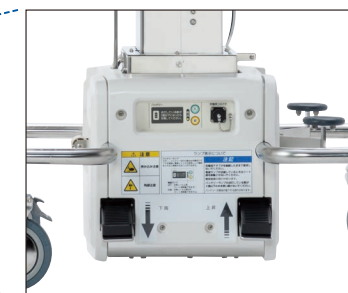


フットスイッチ

操作中に手が空くので、介助中も安心です。

3 安全に入浴でき さまざまなレイアウトに対応

フレキシブルな3タイプの設置

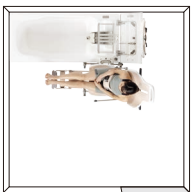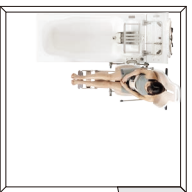
	コーナー設置	アイランド設置	側面設置
搬送車なし			
搬送車あり			

- コーナー設置
- アイランド設置
リフトは2方向から使用可能。
直接入浴では、4方向から浴槽内に
アプローチできます。
- 側面設置

2×2mの浴室に設置可能なコンパクト設計


[コーナー設置の場合のみ]

サービス付き高齢者向け住宅やグループホームなど、小規模施設の小さな浴室にも対応可能なコンパクト設計。施設のニーズに合わせたレイアウトをおこなうことができます。

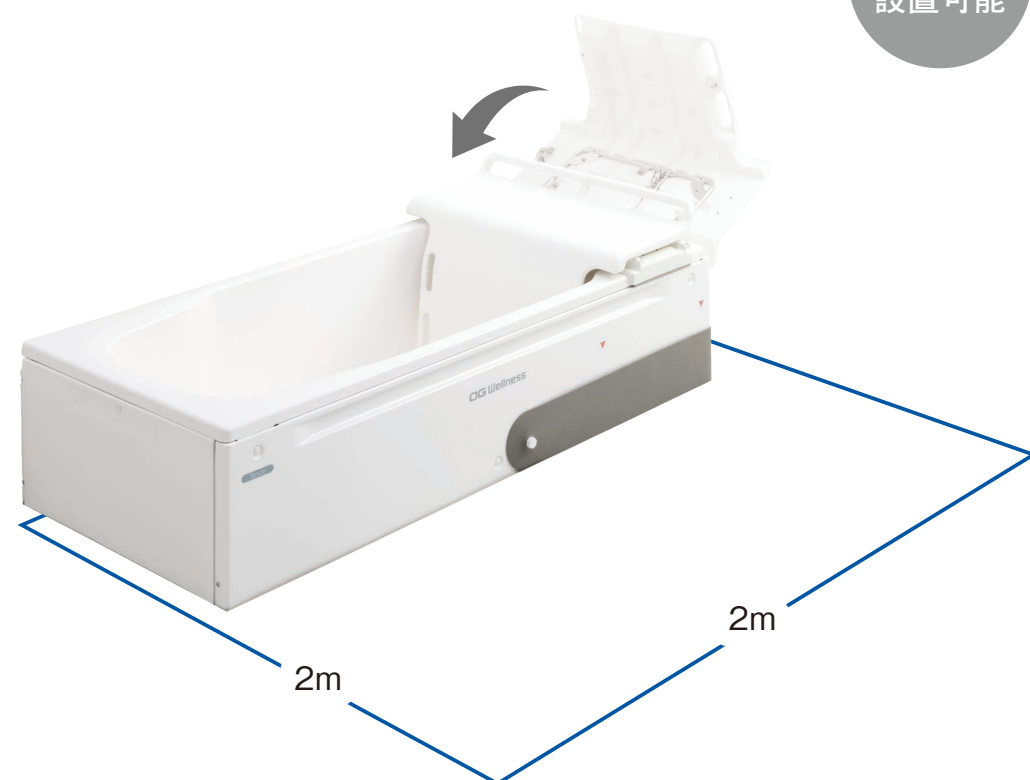

2×2m
設置可能

入浴をサポートする背もたれ

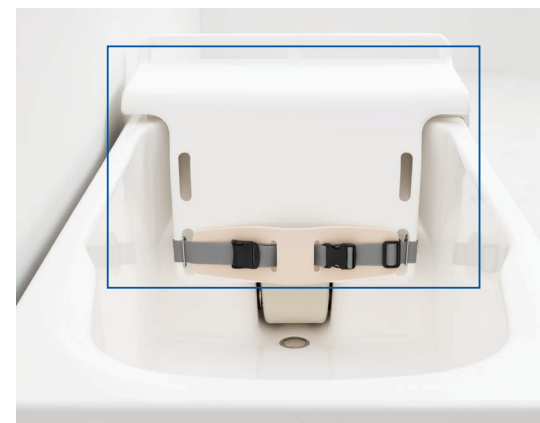

背もたれと付属の安全ベルトにより、入浴姿勢を安定させ、ずり込みも防止します。

握りやすい浴槽縁



入浴や退浴が安全におこなえるよう、縁をつかめる形状になっています。


移乗シート

[オプション]



移乗シートは、スライド/回転機能があるため、移乗をスムーズにおこなうことができます。

ユニットバスにも対応

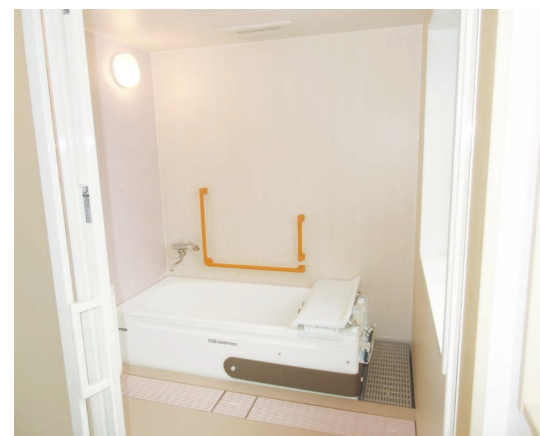

設置例:株式会社小笠原

コンパクトな設計で大きな場所を必要としないため、居住系施設・小規模施設へ簡単に設置可能です。ユニットバスにも設置できるため、防水工事が困難な場合にも最適。幅広くさまざまな施設での利用が可能です。



6年間保証

テヌート

HK-730L /R/A ※価格についてはP.9をご参照ください。

外形寸法	HK-730L/R: 1990(L)×775(W)×1130(H)mm HK-730A: 1990(L)×785(W)×1130(H)mm	
浴槽内寸法	1190(L)×655(W)×510(D)mm	
質 量	HK-730L/R: 161kg HK-730A: 166kg	
電 源 電 圧	AC100V50/60Hz	
消 費 電 力	240W(50Hz/60Hz)	
主 な 材 質	浴槽、外装/FRP、フレーム/ステンレス	

〈標準付属品〉		
浴槽洗浄剤	SA-1	1本
取扱説明書		1部
入浴事故防止ラベル		1枚
安全ラベル(大)		1枚

固定式搬送車

RA-731L/R ￥1,300,000 (税別)

外形寸法	745～1240(L)×570(W)×1340(H)mm (台車部: 735(L)×555(W)×420(H)mm)	
質 量	40kg	
主 な 材 質	フレーム/ステンレス、バックレスト/ポリプロピレン シート/ポリプロピレン、安全ベルト/ナイロン スポンジマット/発泡ポリエチレン	

〈標準付属品〉		
マット外し	RA735-001	1個
取扱説明書		1部

〈機能・性能〉		
安全ベルト	抗菌マット	
抗菌パッド	レッグレスト位置調整	

昇降式搬送車

RA-735L/R ￥2,400,000 (税別)

外形寸法	795～1240(L)×570(W)×1340～1540(H)mm (台車部/795(L)×555(W)×420～620(H)mm)	
質 量	75kg	
電 源 電 圧	DC24V(12V 2Ahr バッテリー×2)	
主 な 材 質	外装カバー/AES樹脂、フレーム/ステンレス バックレスト/ポリプロピレン、シート/ポリプロピレン 安全ベルト/ナイロン、スポンジマット/発泡ポリエチレン	

〈標準付属品〉		
マット外し	RA735-001	1個
充電用アダプタ		1個
取扱説明書		1部

〈機能・性能〉		
安全ベルト	抗菌マット	レッグレスト位置調整
抗菌パッド	電動昇降	

テヌート HK-730

消耗品



	品 名	品番	数量	価 格
01	保護シート	HK730-004	1枚	¥12,000(税別)
02	浴槽洗浄剤	SA-1	4本セット	¥12,000(税別)
03	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
04	安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)
05	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
06	移乗シート	HK730-005	1個	¥90,000(税別)

搬送車 RA-731/RA-735

消耗品



	品 名	品番	数量	価 格
01	スポンジマット(背部)	RA8250-003	1枚	¥15,000(税別)
02	スポンジマット(臀部)	RA731-007	1枚	¥9,000(税別)
03	スポンジマット(足部)	RA731-008	1枚	¥6,000(税別)
04	スポンジマット(踵部)	RA731-010	1枚	¥4,500(税別)
05	クリップボタン(10個)	RA355-022	1セット	¥4,000(税別)
06	クリップ(10個)	RA825-010	1セット	¥1,200(税別)
07	マット外し	RA735-001	1個	¥1,900(税別)
08	パッド	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)
09	安全ベルト(腰部)	RA825-001	1本	¥7,500(税別)
10	固定用バックル	IB50SA-BK	1個	¥700(税別)
11	充電口キャップ(RA-735のみ)	RA255-005	1個	¥3,400(税別)

※スポンジマット交換の際には、合わせて、クリップ、クリップボタンの交換もお勧めします。

オプション



	品 名	品番	数量	価 格
01	ヘッドレスト	RA8250-006	1個	¥35,000(税別)
02	安全ベルト(胸部)	RA825-009	1本	¥9,000(税別)
03	安全ベルト(足部)	RA731-003	1本	¥18,000(税別)
04	パッド(足部)	RA731-009	1枚	¥5,700(税別)
05	パッド※	RA355-015	1枚	¥5,700(税別)

※腰と胸は共通です。





SIAAマークは、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

使用抗菌剤の種類	…	無機抗菌剤
加工方法	……………	練込
加工部位	……………	マット
登録番号	……………	JP0123356X0006H

レイアウト別のセットコード

固定式搬送車 RA-731L/R

それぞれ浴槽1台と搬送車(RA-731)1台が含まれています。

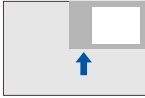
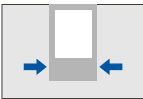
	左接続タイプ		右接続タイプ		両側接続タイプ	
	セットコード	価 格	セットコード	価 格	セットコード	価 格
コーナー設置					—	
	HK-730L-S1	¥5,450,000(非課税)	HK-730R-S1	¥5,450,000(非課税)		
アイランド設置						
	HK-730L-S2	¥5,610,000(非課税)	HK-730R-S2	¥5,610,000(非課税)		
側面設置					—	
	HK-730L-S3	¥5,570,000(非課税)	HK-730R-S3	¥5,570,000(非課税)		

※RA-731L/Rを追加購入されるお客様は1台¥1,300,000(税別)となります。

※追加購入の場合もメンテナンス対象機種となります。

昇降式搬送車 RA-735L/R


それぞれ浴槽1台と搬送車(RA-735)1台が含まれています。

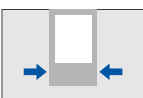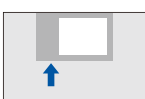	左接続タイプ		右接続タイプ		両側接続タイプ	
	セットコード	価 格	セットコード	価 格	セットコード	価 格
コーナー設置					—	
	HK-730L-S4	¥6,565,000(非課税)	HK-730R-S4	¥6,565,000(非課税)		
アイランド設置						
	HK-730L-S5	¥6,730,000(非課税)	HK-730R-S5	¥6,730,000(非課税)		
側面設置					—	
	HK-730L-S6	¥6,685,000(非課税)	HK-730R-S6	¥6,685,000(非課税)		

※RA-735L/Rを追加購入されるお客様は1台¥2,400,000(税別)となります。

※追加購入の場合もメンテナンス対象機種となります。

設置工事図

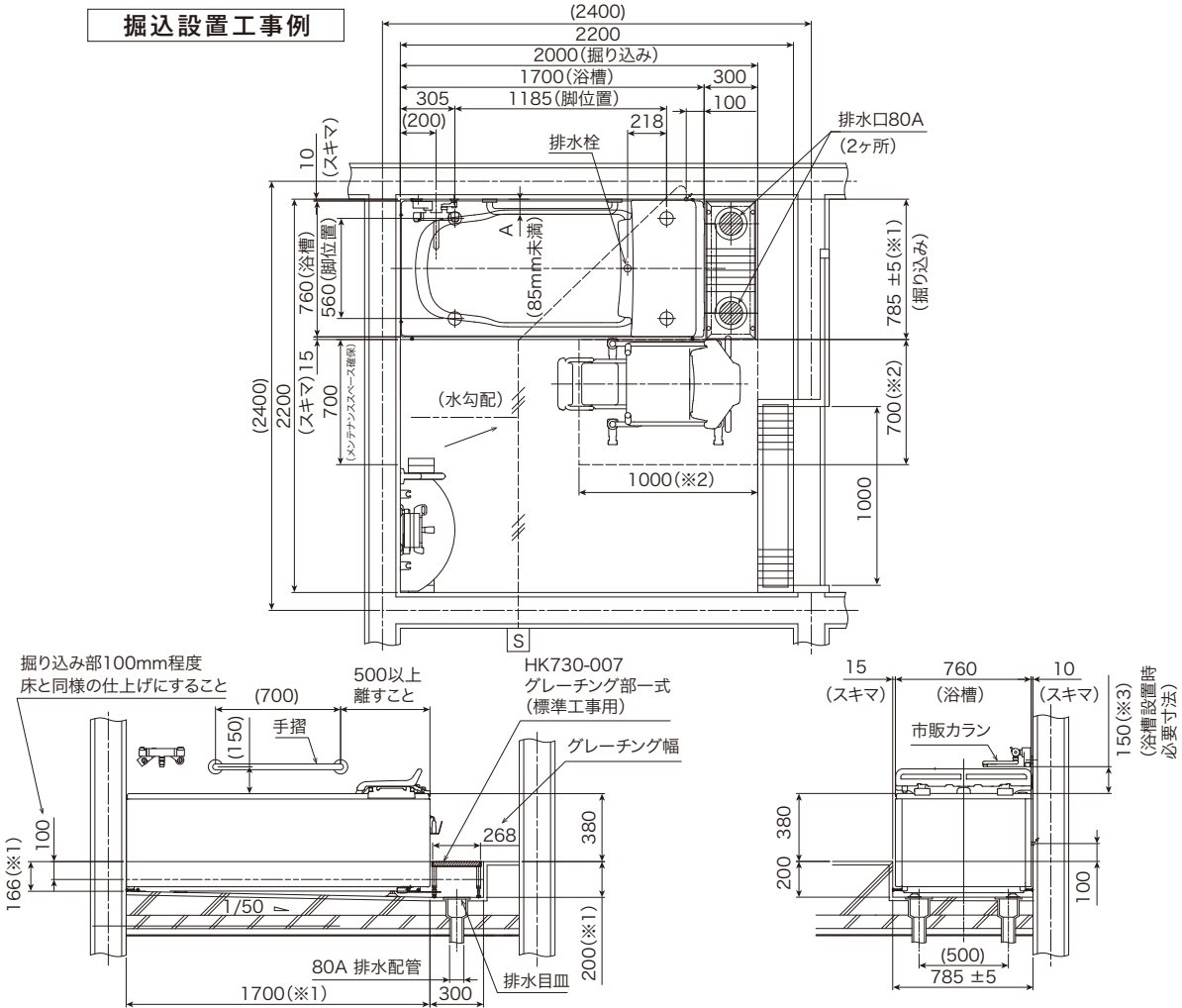

設置条件	
電源	単相100V、50/60Hz、15A 漏電遮断器…単相100V、15A(感度電流:30mA) (配電盤には単独の漏電遮断器を設けること) 開閉器…単相100V、15A(浴室外のすぐに操作できる位置へ設けること) アース線はD種の規定に準ずること。
電線	電線…単線1.2mmまたは、より線1.25mm ² ×3芯以上 (内線規程、敷設状況に応じて適切に選定すること)
PF管	壁面より30mm程度出し通線、電線はPF管端より500mm以上出す。 PF管の端末は防水処理を施すこと。
水勾配	掘り込み部(※1)部で示した範囲は、水勾配1/50以上とする。 [](※2)部で示した範囲は、水勾配1/100以下とする。
床面	床耐荷重:アジャスター部1ヶ所につき200kg以上(脚数:4ヶ所) 最大浴槽重量:650kg±5%(満水+入浴者100kg)
排水	溝内に排水口を設けること。(80A、2ヶ所) トラップ等の防臭対策を実施し、排水能力100L/min以上確保のこと。
給湯	壁面に浴槽給湯用のカランを設けること。(推奨:TOTO製 TMGG40A) カラン湯側脚に断熱用脚カバー(TOTO製 THD30R)を取り付けること。 カランの高さは浴槽縁より150mm程度あけること。浴槽設置時必要寸法(※3)部 カランは取り外しが出来ること。
手摺	浴槽設置時取り外しできること。(推奨:TOTO製 TS134GY7S) 図中Aの寸法は85mm未満とする。 (搬送車のシート部と手摺のクリアランス確保のため)
掘り込み	浴槽設置場所の床面を基準とした時の掘り込み深さを示す。 本図の掘り込み深さは最小寸法200mmを示す。(推奨:220mm)