

# 安全な移乗介助と腰痛予防に活用

要施工  
設置費別途

定期点検  
契約必須

## 天井走行リフト

- リフティング使用前後の昇降が早い『ターボスピード』で待ち時間が短縮されます。
- やわらかいシリコン製の円形ボタン、握りやすいグリップの手元スイッチ。

※レール、リフティングハンガー、スリングシートは別売りです (p.8～10、14～17掲載)。  
※写真とは一部仕様が異なる場合があります。

### 安全機構

- 上昇下降リミットスイッチ
- 緊急停止装置
- 緊急下降装置
- 上昇時ねじれ巻き込み防止装置
- 無負荷感知ロック機構
- オートパワーオフ機能
- スロースタート機能



### 活用事例

#### 特別養護老人ホーム とびのこ苑 (島根県)

天井走行リフトを活用して、浴室でも「抱きかかえない介護」を実践されている事例です。



▲特殊浴槽との組み合わせ



▲トイレもカバー

### GH3、GH1Q、GH1 用オプション

#### 頭部に近づく部分をフォームでカバー リフティングハンガー フォーム付

- バーの部分がPUフォームでカバーされています。
- フックはストラップを掛けやすく、外れにくい設計。

	小	大
寸法 (cm)	A	50
	B	44
	C	10
重量 (kg)	1.6	1.8
材質	スチール、PUフォーム	



商品番号	種別
7288-40	小
7288-41	大



天井走行リフト  
移乗機器

入浴機器

レク・リハビリ機器

歩行器・杖

車いす

床ずれ予防用具

施設設備・備品

アビリティーズの紹介

# レール内で充電できる 最大荷重 250kg のパワフルリフト



## 天井走行リフト GH3

最大荷重  
250kg

- 直線型の充電レール部分に移動させておくだけで充電できるので、充電忘れの心配が減少。
- ワイヤレスリモコン使用も可能。

※ポジションロック (p.59 掲載) と組み合わせて利用できます。



商品番号	種別
7296-80	電動走行リモコン付
7296-70	電動走行
7296-60	手動走行リモコン付
7296-50	手動走行



### ◀ワイヤレスリモコン (リモコン付機種付属)

リモコン付機種は、有線手元スイッチ、ワイヤレスリモコンのいずれかで操作できます。ワイヤレスリモコンで、電動レールシステムの操作も可能です。



### ▶手元スイッチ (電動走行用)

●寸法/外寸：幅 34.5 × 奥行 20.5 × 高さ 15.6cm ●重量/手動走行本体：9.6kg、電動走行本体：10.5kg ●ストローク/250cm ●昇降速度/85kg 負荷時：毎秒 4.0cm、5kg 負荷時：毎秒 10.0cm ●バッテリー/24V × 1 個

天井走行リフト  
移乗機器

入浴機器

レク・リハビリ機器

歩行器・杖

# 取り外し・移設が容易なポータブルタイプ (GH1Q) と 常設式スタンダードタイプ (GH1)



## 天井走行リフト GH1Q / GH1

最大荷重  
205kg


- 手元スイッチを充電ホルダーに接続して、充電します。バッテリー方式で、3 時間で充電完了。

本体の数を最小限に！レールからの着脱も簡単な GH1Q



▲ GH1

▲充電時

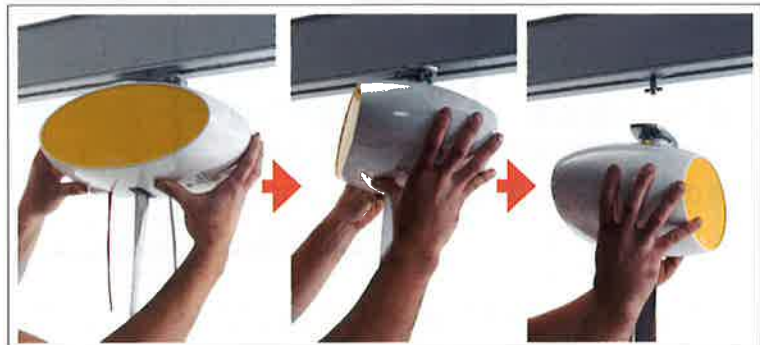

工具を使わずに取り付け、取り外しが簡単。他の部屋に移動して使用できます。  
※ GH1Q はコンビロックとトラックスイッチにはお使いいただけません。

商品番号	種別
7158-60	GH1Q ポータブル手動走行
7152-60	GH1 手動走行

●寸法/外寸：幅 35.3 × 奥行 20 × 高さ 16.1cm ●重量/8kg ●ストローク/250cm ●昇降速度/85kg 負荷時：毎秒 4.0cm、5kg 負荷時：毎秒 8.0cm ●バッテリー/24V × 1 個

車いす

床ずれ予防用具

施設設備・備品

アビリティーズの紹介

# レールシステム 設置型と据置型レールのご紹介



要施工  
設置費別途

## 1. 天井設置型レール

天井にレールを設置することで、居室・病室から、トイレ、浴室、デイルーム、リハビリ室、手術室まで、さまざまな場所で使用できます。床や段差、通路幅にも影響されません。施設で、レール全長 4km の設置事例もあります。




病院 4人部屋  
ルームカバリングシステム▶

ルームカバリングのお部屋から他のお部屋へ移動  
**コンビロック**



レールが正確に接続されたときにだけストッパーが解除される安全装置付き。

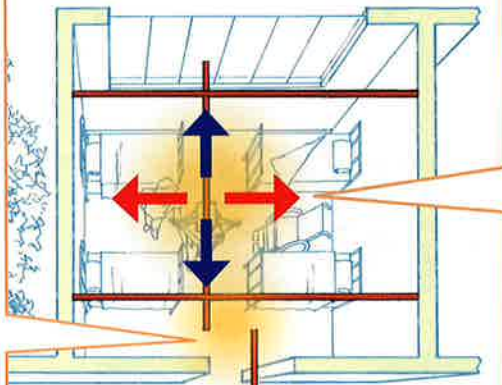

移動するレールで、お部屋全体をカバールームカバリングシステム




室内どこでも移動できます。

狭い場所での方向転換に  
**ターンテーブル**



有線スイッチやワイヤレスリモコン（オプション）で方向転換。トラックスイッチより省スペースです。

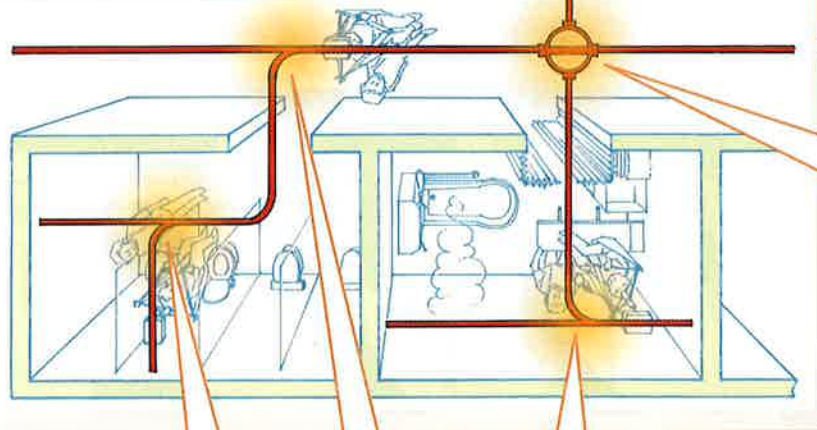

レールを2方向に切替  
**トラックスイッチ**

有線スイッチやワイヤレスリモコン（オプション）でレールを2方向に切り替えます。



レイアウトに合わせて  
**カーブレール**

30度、45度、60度、90度から選べます。

天井走行リフト  
移乗機器

入浴機器

レフ・リハビリ機器

歩行器・杖

車いす

床ずれ予防用具

施設設備・備品

アビリティーズの紹介