

マットレスの **定期点検** されていますか？

〔推奨される点検項目〕

- マットレスカバー表面に損傷、汚染、摩耗の兆候はないか
- カバーを取り外して、カバー内側、マットレス本体の表裏及び側面に変色やシミ、汚染や劣化の兆候はないか

※マットレスカバーの色は暗い傾向にあり、マットレスの損傷や汚染の特定が難しい場合があることに留意する必要があります。



Lentex® イエルベンレンテックスマットレス

● ストライクスルー防止 (※)

- ① ジッパーや縫い目なしに、フォームに密着
- ② 伸縮時でさえ、マットレス内部への汚染を防止


● 簡単メンテナンス

- ① 拭き取るだけで、汚染を簡単除去
- ② 表面が傷ついたら、その場で修理可能（レンテックステープ）

● 全方向に600%の伸び率

- ① フォームへの沈み込みをさまたげない

※ストライクスルー：流体がマットレスカバーから浸み通り、マットレス本体に浸透すること

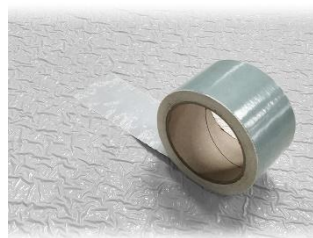

商品番号：5350

コンフォートB

清潔な環境で、ゆっくりと安心して寝ていただくために、柔らかすぎない硬さで体を支える体圧分散マットレスです。

- ・サイズ 78x191x9cm、83x191x9cm、89x191x9cm
- ・耐荷重 110Kg
- ・品質規格(難燃性) SS8760011 (テスト方法EN597-1&2)
- ・品質規格(圧分散) SS8760013

