

Pansy*i*

SAKAImed
明日に踏み出すチカラ。酒井医療

パーソナルケア浴槽 パンジーiシリーズ
PNS-300・PNS-310・PNS-320

シニアが暮らすすべての場所で

自立を支援するお風呂




幅広いご利用者への対応

ひとりひとりの日常生活動作レベルに合った入浴を、サポートします。

ひとりで歩けるけれど
「またぎ」動作が
不安な方には

浴槽手すりとの
組み合わせで
安心して入浴できます。

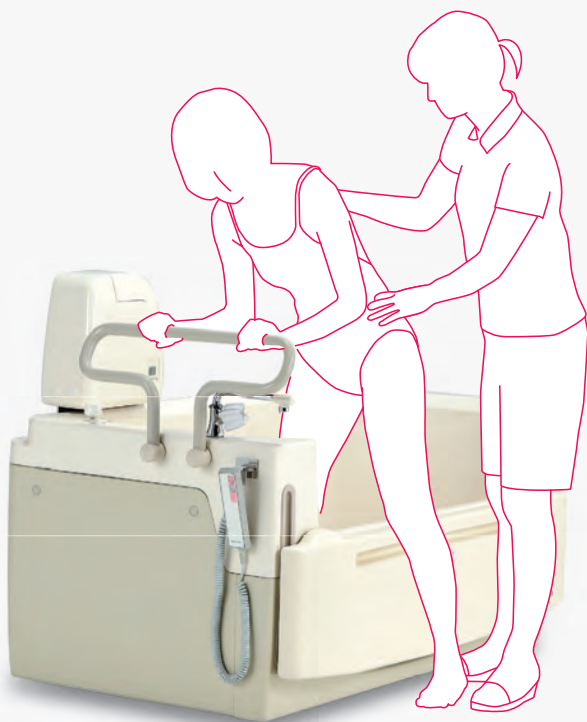

パンジー i
シンプルセット



浴槽手すり

バランスが
とりづらい方には

トランスファー手すりを
プラスすれば、
片足立ちの際の重心移動が、
スムーズに行えます。



パンジー i
シンプルセット



浴槽手すり



トランスファー
手すり

入浴する方の日常生活動作レベルに合わせて
選べる3つの基本セットをご用意。

基本セット＜浴槽は3タイプ＞



シンプルセット パーソナルセット スタンダードセット



必要に応じてオプションを追加することで、
さまざまな状態の方に対応できます。

オプション＜自立を支援するオプション＞




昇降ユニット トランスファー手すり 浴槽手すり 移乗台

詳しくは5～6ページをご覧ください。

立ち上がり動作が
不安な方には

昇降ユニットを利用すれば、
少しの手助けで
浴槽内に入れます。

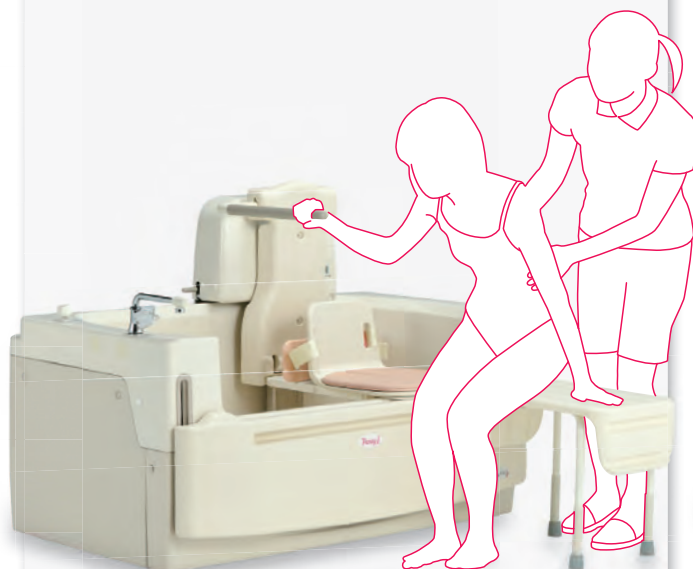

バンジー
シンプルセット




昇降ユニット



移乗台

入浴中の姿勢が
保ちにくい方には

背当てと安全ベルトが
腰部を固定し、
入浴中も姿勢を
維持しやすくなります。

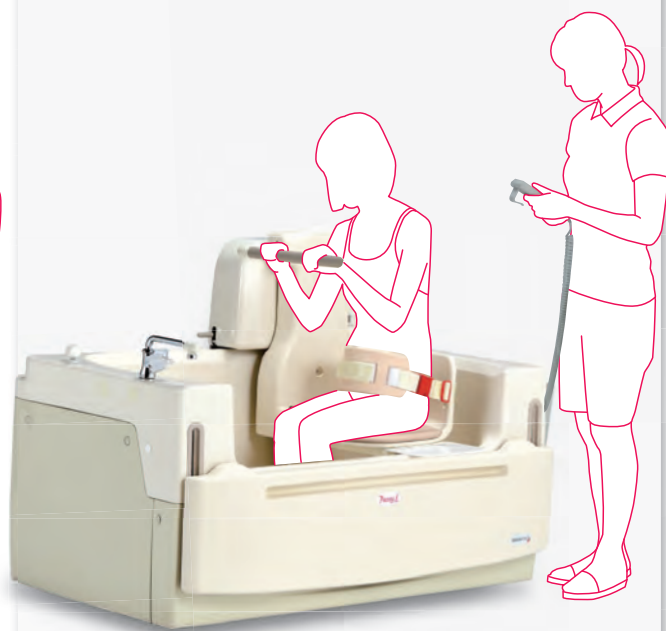

バンジー
シンプルセット



昇降ユニット

据置型でコンパクト

施設はもちろん、お住まいのリフォームにも最適です。

●コンパクト設計


ユニットケア、小規模多機能施設、サービス付き高齢者向け住宅など、シニアリビングにも導入しやすい大きさです。1600×2000mmのスペースがあれば設置できます。

●掘り込み・電気工事 給排水工事不要

床工事なしで設置できる据置型。バッテリー充電タイプなら電気工事もららず、既存の浴室に短時間・省コストで設置できます。



家庭用電源で充電でき、1回の充電で約40回の入浴が可能。外側からでも充電残量の確認ができます。(DC仕様のみ)

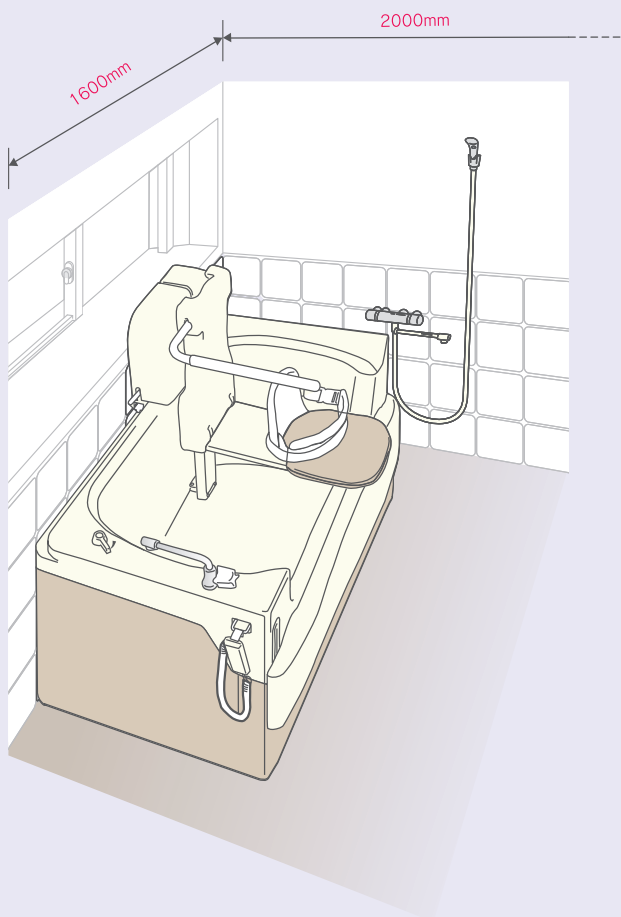

※設置可能なユニットバスについては最寄りの営業所へお問い合わせください。
※ユニットバスに設置する場合、専用の取付部品が必要です。(有料)

介護用ユニットバスにも設置可能

積水ホームテクノ株式会社



※写真はKGS-2020型

対応機種：

介護浴室システム「wells」

KGS8-2541/2537/2533/2041/
2037/2035/2033/2031連結タイプ
KGS8-2020/2025/1620/1625
KGS8-1616/1618/1621/1623/1818
KGK3-1616

パナソニック株式会社



※写真はa-Uシリーズ

対応機種：

アクアハートa-Uシリーズ

AHKN05-1620B (A) L (R)
AHKN05-2020B (A) L (R)
AHKN05-1624B (A) L (R)
2室連結タイプ 2041/2037/2033/1645/1641

TOTO株式会社



※写真はXA2020


対応機種：

介護ユニットバスシリーズ
XA1620/XA2020

設置例


介護浴室で

パンジー i と日常生活動作レベルが重度な方向けの介護浴槽を組み合わせれば、さまざまな状態の方に対応できます。

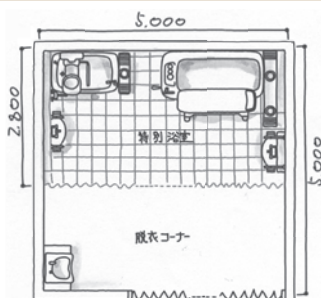


ユニットバスで

パンジー i なら介護用ユニットバスにも設置が可能。入居者の自立度の変化に応じて浴室環境を作り替えることができます。

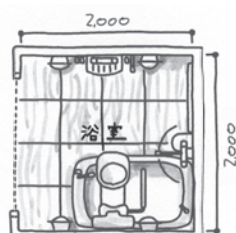

ユニットケアの浴室で

各ユニットに導入することで、ひとりひとりの日常生活動作レベルに合わせた自立入浴を支援できます。

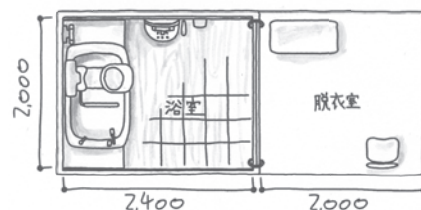

安心・安全設計

安全にゆったりと入浴が楽しめます。


01 座り心地と安定感のよいシート

座面シートは、濡れても冷たさを感じない、肌触りのよい材質を採用。入浴中の姿勢を保持できるよう、背当てと安全ベルトは標準装備しています。



02 ゆったりつかれる深い浴槽

深さは、590mm なので大柄な方でもゆったりつかれます。

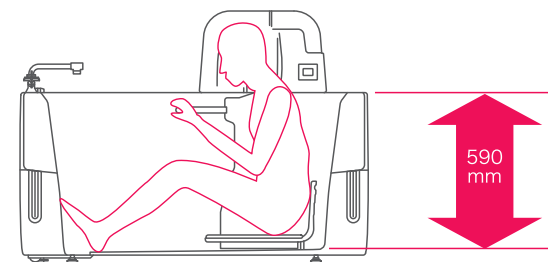

03 スライドする昇降ユニット

昇降ユニットは、麻痺のある方など、入浴する方の状態に合わせて浴槽の左右どちらにも動かせます（スタンダードセット PNS-310 のみ）。



04 清掃が簡単

座面マットは、昇降ユニットから取り外して清掃できます。また、スライドシートは、折りたためるので、浴槽清掃時に便利です。



05 気持ちが和むひのき柄

パンジー i の浴槽を独自の特許技術で塗装。木素材と違って割れやヒビが入らず、カビにくい素材のためお手入れも簡単。傷に強く剥がれにくいので、ひのき風呂のような美しさが長持ちします。



3つの基本タイプと豊富なオプションをご用意しました。



自立を支援する浴室改修に

浴槽縁が低く、またぎやすい据置型浴槽。
昇降ユニットの後付けができ、重度化対応が可能です。

シンプルセット PNS-300

(DC仕様) PNS-300

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC仕様	PN-300DC	1台
コントロールユニット DC仕様	PN-301DC	1台

(AC仕様) PNS-300AC

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC仕様	PN-300AC	1台
コントロールユニット AC仕様	PN-301AC	1台

ひのき柄

(DC仕様) PNS-300H

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC仕様 ひのき柄	PN-300DCH	1台
コントロールユニット DC仕様	PN-301DC	1台

(AC仕様) PNS-300ACH

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC仕様 ひのき柄	PN-300ACH	1台
コントロールユニット AC仕様	PN-301AC	1台

外形寸法目	1300 (L) × 812 (W) × 947 (H) mm
浴槽内寸	1140 (L) × 628 (W) × 590 (D) mm
質量	約 70kg
実使用湯量	約 295L
電源	DC24V (DC仕様) 単相 100V (AC仕様)
排水目皿	65A
材質	浴槽・カバー/FRP、フレーム/ステンレス



将来も住み続けるシニアリビングに

設置時に昇降ユニットの位置を
左右選択できます。

パーソナルセット PNS-320

(DC仕様) PNS-320

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC仕様	PN-300DC	1台
固定式昇降ユニット DC仕様	PN-320DC	1台

(AC仕様) PNS-320AC

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC仕様	PN-300AC	1台
固定式昇降ユニット AC仕様	PN-320AC	1台

ひのき柄

(DC仕様) PNS-320H


〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC仕様 ひのき柄	PN-300DCH	1台
固定式昇降ユニット DC仕様	PN-320DC	1台

(AC仕様) PNS-320ACH

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC仕様 ひのき柄	PN-300ACH	1台
固定式昇降ユニット AC仕様	PN-320AC	1台

外形寸法目	1300 (L) × 812 (W) × 942 (H) mm
浴槽内寸	1140 (L) × 628 (W) × 590 (D) mm
質量	約 110kg
実使用湯量	約 290L
電源	DC24V (DC仕様) 単相 100V (AC仕様)
排水目皿	65A
材質	浴槽・カバー/FRP、フレーム/ステンレス

付属品／PNS-320・PNS-310 用

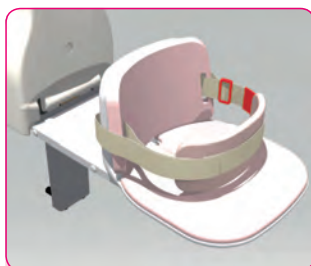

背当てマット D4D3251A

寄りかかった姿勢でリラックスしながら入浴していただけます。



ストッパーマット D4D3470

スライドシートを固定し、座る前のズレを防止します。

オプション／上記に組み合わせてご使用いただけます。



昇降ユニット

シンプルセット (PNS-300) に後付け可能なため、重度化対応ができます。

移動式は左右自由にスライド可能。

固定式は設置時に左右を選択します。

〔移動式昇降ユニット〕

DC仕様 PN-310DC

AC仕様 PN-310AC

〔固定式昇降ユニット〕

DC仕様 PN-320DC

AC仕様 PN-320AC

パーソナルセット／スタンダードセット



個別ケアをお考えの施設に

シートは左右自在にスライドするので、
いつでも入浴する方に合わせたセッティングが可能です。

スタンダードセット PNS-310

(DC仕様) PNS-310

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC 仕様	PN-300DC	1台
移動式昇降ユニット DC 仕様	PN-310DC	1台

(AC仕様) PNS-310AC

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC 仕様	PN-300AC	1台
移動式昇降ユニット AC 仕様	PN-310AC	1台




ひのき柄

(DC仕様) PNS-310H

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 DC 仕様 ひのき柄	PN-300DCH	1台
移動式昇降ユニット DC 仕様	PN-310DC	1台

(AC仕様) PNS-310ACH

〔構成〕 パンジー i 浴槽本体 AC 仕様 ひのき柄	PN-300ACH	1台
移動式昇降ユニット AC 仕様	PN-310AC	1台

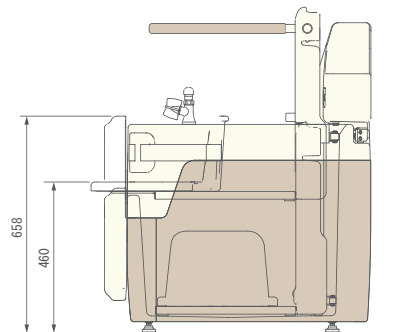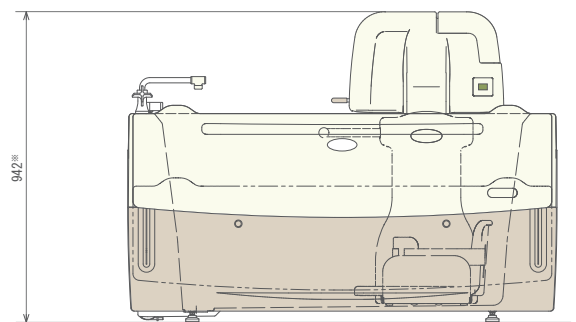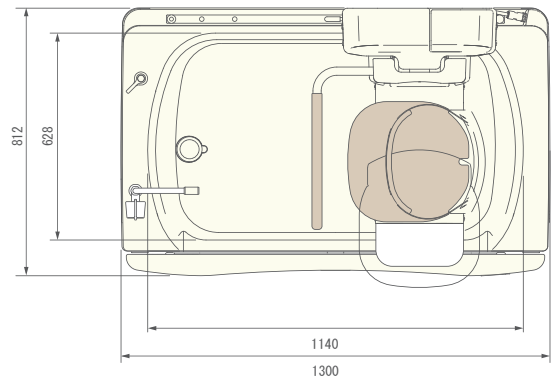

※シンプルセットの外形寸法の高さは947mmです。その他の浴槽寸法は同じです。

外形寸法目	1300 (L) × 812 (W) × 942 (H) mm
浴槽内寸	1140 (L) × 628 (W) × 590 (D) mm
質量	約 110kg
実使用湯量	約 290L
電源	DC24V (DC仕様) 単相 100V (AC仕様)
排水目皿	65A
材質	浴槽・カバー / FRP、フレーム / ステンレス

トランスファー手すり
PN-230

シートへのトランスファー時や、洗身時の立位保持、姿勢保持をアシストします。

回転して左右どちらのアプローチにも使用可能です。

●外形寸法：440 (L) × 700 (W) × 870 (H) mm ●質量：約20kg



浴槽手すり PN-220

入浴時のバランスを保ちます。

●外形寸法：550 (L) × 90 (W) × 285 (H) mm ●質量：約2kg



移乗台 PN-250

スライドシートに移乗するとき便利です。42～48cmに高さを調節できます。

●外形寸法：530 (L) × 350 (W) × 420～480 (H) mm ●質量：約3.5kg



給湯ユニット PN-330

短時間で、給湯が完了します。

●外形寸法：470 (L) × 715 (W) × 1410 (H) mm ●質量：約70kg ●貯湯タンク容量：約90L

パーソナルケア浴槽

パンジー i ひのき柄

Pansy i

独自の特許技術で塗装しており、お手入れ簡単！
心安らぐ「和」のデザインでお風呂場になくもりを。



酒井医療株式会社

東京都新宿区山吹町358-6 〒162-0801

www.sakaimed.co.jp

札幌営業所	(北海道)	Tel: 011-780-5570
盛岡営業所	(青森・秋田・岩手)	Tel: 019-656-5336
仙台営業所	(宮城・山形・福島)	Tel: 022-390-6840
新潟営業所	(新潟)	Tel: 025-278-4777
長野営業所	(山梨・長野)	Tel: 0263-40-5014
埼玉営業所	(埼玉・群馬・栃木)	Tel: 048-662-4560
千葉営業所	(千葉・茨城)	Tel: 047-497-3691
東京営業所	(東京)	Tel: 03-5227-5779
横浜営業所	(神奈川・静岡)	Tel: 045-590-5485
中部第1営業所	(愛知)	Tel: 052-263-9867
中部第2営業所	(岐阜・三重)	Tel: 052-263-9867
金沢営業所	(石川・富山・福井)	Tel: 076-292-1161
関西第1営業所	(京都・滋賀・奈良・和歌山)	Tel: 06-6386-3545
関西第2営業所	(大阪)	Tel: 06-6386-3545
神戸営業所	(兵庫・鳥取・島根)	Tel: 078-579-6236
広島営業所	(広島・岡山・山口)	Tel: 082-830-0420
高松営業所	(香川・徳島・愛媛・高知)	Tel: 087-865-0715
福岡営業所	(福岡・長崎・大分・佐賀・熊本・沖縄)	Tel: 092-588-9331
鹿児島営業所	(鹿児島・宮崎)	Tel: 099-252-5251

取扱店


SHIP HEALTHCARE
GROUP



JQA-QMA12289

A96 2017.04