

状態検知センサー

ネオスケア Wave



非接触のセンサーが利用者の状態を見守り、介護業務の負担を軽減！

60GHz ミリ波レーダーを使用した非接触のセンシングで、夜間見回りの負担軽減や、利用者様の状態悪化の発見、健康管理や予防に活用できます。



機能 1：利用者の今の状態を見える化

- ・利用者の今の状態を、PC 画面の一覧表示でリアルタイムに把握できます
- ・利用者の状態を確認の上、訪室要否が判断できます



※呼吸は、体動から推測した推定値となります

機能 2：利用者の状態の変化を通知

- ・利用者の状態（入床・離床）の変化を、スマホ端末に通知します
- ・利用者の変化に気づき、適切に対処できます




入床状態




離床状態

機能 3：利用者の呼吸の変化を把握

- ・利用者の呼吸の変化（上昇・低下）をスマホ端末に通知します
- ・利用者の体調の変化に気づくことができます

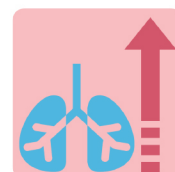

呼吸上昇

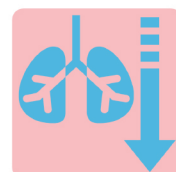

呼吸低下

ユーザーニーズに応える、柔軟なシステム構成

カメラ型見守りセンサー（行動検知センサー）と組み合わせることで、1つの画面で居室の様子と利用者の状態の両方をひと目で確認することができます。

施設様のニーズやご予算に合わせて、全床見守りの体制を構築・検討が可能です。



CASE 1

行動検知センサー・状態検知センサー両方を全床に導入



どちらも全床に導入

居室の様子と利用者の状態を一元管理。全利用者に対し、手厚い見守りが可能。

CASE 2

行動検知センサーを必要な方に、状態検知センサーを全床に導入



部分導入

全床導入

利用者の状態を状態検知センサーで一元管理。転倒リスクのある方等、居室の様子が気になる方に行動検知センサーを追加し、手厚く見守り。

製品仕様

商品名	状態検知センサー ネオスケア wave
外形寸法 / 質量	幅 (W) : 50mm、高さ (H) : 50mm、奥行 (L) : 58mm/43g (ケーブル除く)
電源	消費電力 : 3W AC 100V
無線規格	IEEE802.11b/g/n 2.4GHz 帯
取付方法	ベッド頭側の壁面に専用アタッチメントまたはネジ止めにて取り付け

※状態検知センサーは単体で使用することはできません。別途、Neos+Care 専用サーバーが必要です。

＜重要＞

- 本製品は、体動を検出するためのセンサーであり、**生命に関わる環境下での監視には使用できません。**
- 寝返りなどの体動が多い等の利用者の状況や、居室の構造によって呼吸を検出できない場合がありますので、生命に関わる監視装置としての性能、機能は有していません。

ノーリツプレシジョン株式会社

〒640-8550 和歌山市梅原 579-1

TEL 073-456-3966

FAX 073-456-3991

<http://www.noritsu-precision.com>