

「警報音・ドアホンなど」音を学習し 文字と振動で知らせます。



聴覚障害者用屋内信号装置

「知らせる君」

日常生活用具給付対象品

※給付に関する細かい条件は
お住まいの自治体の障害福祉課へお問合せください。


特徴

- 1.既存のドアホン・FAX・各種警報器の傍に設置することでどんな機器の音でも学習することができます。
- 2.学習した音だけを検出するので誤報しません。
- 3.腕時計型受信機は防水のため入浴時でも身に付けておけて見落としを防ぎます。
- 4.設定により腕時計型受信機の表示する警報メッセージをご自身で変更可能です。※
- 5.設定により学習機能を使わず大きな音だけを検出するモードがあります。※
- 6.設定により、ドアホンの呼び出しボタンとしても使用可能です。※
- 7.光受信機は点滅の速さで警報種類をお知らせします。
※設定変更は別売りのゲートウェイが必要です。



様々な音を学習します。

～危険な状況で命を助けます～

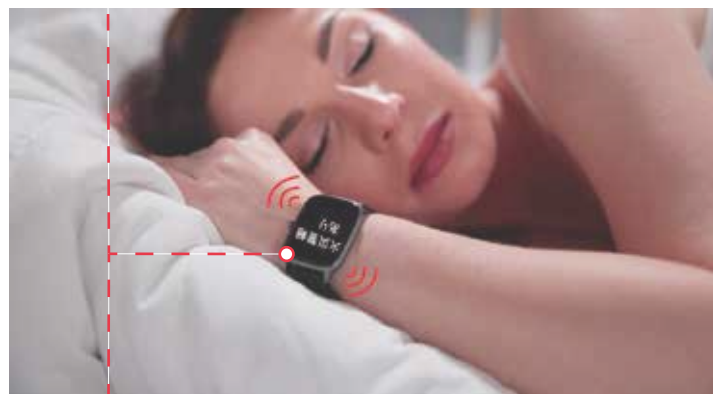

補聴器を外している時も
振動と文字で知らせる



AI音感センサー仕様	
質量	22g (ケーブル含まない)
入力コネクタ	USB type-C (充電専用)
使用電源	リチウム充電電池 (Lip400mAh)
保存温度範囲	-20℃～+60℃ (1年未満)
外形寸法	W45mm×H18.5mm×D45mm

腕時計型受信機:	
質量	約51g
外形寸法	W41mm×H56mm×D18mm (バンド含まない)
使用電源	リチウム充電電池 (Lip350mAh)
動作時間	待機状態: 約120時間 (満充電、常温湿度時の場合)
環境温度	0℃～40℃
防水性	対応 (IPX5)

光受信機 (電池式):	
受信機単体重量	約40g
外形寸法	W70mm×H28mm×D70mm
受信機最大接続数	無制限
使用電源	単4電池3本
動作時間	待機状態: 約35日 (満充電、常温湿度時の動作の場合)

※本機の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますがご了承ください。

お問い合わせ

Ronk

Ronk株式会社

〒252-0131

神奈川県相模原市緑区西橋本5-4-30

さがみはら産業創造センター SIC2-208

TEL 042-770-9858 FAX 042-703-6885

<http://ronk-jp.com/>

E-mail: info@ronk-jp.com