

Yuiステーション

集中見守り管理システム

「施設まるごと見守り」を実現する 24時間365日集中見守り管理システム

入居者の状態や各居室の状況が一画面ですぐに確認でき、高品質な介護サービスと業務負担の軽減を両立できます。



**ナース
コール**

アイコンや文字で「どの居室から、なぜ呼ばれたのか」が分かります。

**状態
把握**

センサー情報を一覧表示し異常があればアラート表示します。

**履歴
記録**

呼出しやアラート情報を履歴として保存。グラフ化も可能です。

**見守り
集中管理**

見守りセンサーの情報を一括管理。施設全体の情報確認や設定が可能。

**見守り
カメラ**

ナースコールやセンサーと連動し映像がポップアップ。記録も自動。


集中見守り管理システム Yui ステーション

ナースコールや見守りセンサー、カメラを集中管理する介護施設向けの見守り管理システム

Yuiステーション表示画面



見守り通知・ナースコール表示

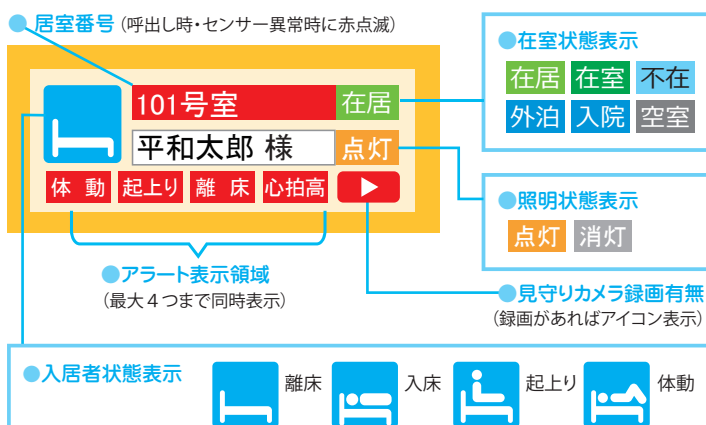

見守り表示・管理



※接続センサーにより表示できる情報は異なります

心拍・呼吸が異常値になった場合通知可



アラート設定は入居者個々に可能。
心拍・呼吸のほか、夏場の熱中症対策として、室温が高い場合などに通知設定もできます。

見守り履歴記録・集計

- 生活習慣グラフ (入離床・起上り・トイレ)
- 呼出し・アラート時系列履歴 (表)



24時間、入離床・起上り・トイレ使用など、室内での生活状態を時系列でグラフ表示。

日時	呼び出し	アラート	アラート履歴
2022/02/15 14:05:53	呼び出し	アラート	入室
2022/02/15 09:40:10	呼び出し	アラート	離床
2022/02/15 09:29:36	呼び出し	アラート	入床
2022/02/15 09:28:37	呼び出し	アラート	離床
2022/02/15 09:28:45	呼び出し	アラート	入床
2022/02/15 06:12:44	呼び出し	アラート	離床
2022/02/15 06:07:02	呼び出し	アラート	入床
2022/02/15 06:08:08	呼び出し	アラート	離床
2022/02/15 06:05:27	呼び出し	アラート	入床
2022/02/15 05:39:10	呼び出し	アラート	離床
2022/02/15 05:48:48	呼び出し	アラート	入床
2022/02/15 05:48:08	呼び出し	アラート	離床

いつ、どこから、どんなナースコールが鳴ったかがデータで分かります。CSVや画像書き出しにも対応。

- 体温・血圧・脈拍グラフ



バイタル計測アプリ「Yuiレコ」との連携で、体温や血圧、体重などを記録。変遷をグラフ表示します。


- 活動割合グラフ



一定期間内の、部屋の中での寝ている、座っている、外に出ている等の活動状況の割合をグラフ表示します。

※集計項目 心拍・呼吸／心拍・呼吸(実測値)／心拍・呼吸・体動日誌／体温・血圧・脈拍／体重／生活習慣／温湿度／呼出・アラート／活動割合／血中酸素飽和度 等

見守りカメラ履歴

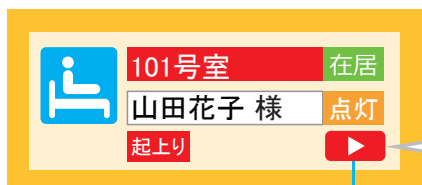


●見守りカメラ録画有無 (録画があればアイコン表示)

呼出しがあったときだけ見守りカメラがポップアップします。また、同時に映像を録画記録することができます。

- 見守りカメラ履歴

年	月	日	時	分	秒
2019	01	16	15	01	23
2019	01	16	10	18	06
2019	01	16	09	02	30
2019	01	15	18	30	42
2019	01	15	18	06	34
2019	01	15	19	04	08
2019	01	15	17	58	25
2019	01	15	17	06	00
2019	01	15	16	39	57

- 見守りカメラ録画再生

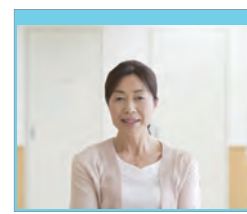

確認したい日時の動画を一発で再生できます。

機能・連携システム

- ナースコール呼出表示、呼出履歴記録・集計
- 各種見守りセンサー (体動、心拍呼吸、室温等) 状態表示、履歴記録・集計、個別しきい値等の設定とその範囲を超えた場合のアラート通知
- 見守り・監視カメラの表示と履歴記録
- おむつセンサー (排尿量通知・履歴記録 等)
- AI顔認証カメラ (徘徊対策・防犯・入室管理)
- 各社介護記録ソフト・システム
- 専用スマートフォン・タブレットアプリ (YuiPhone、Yuiレコ (血圧・体重・血中酸素濃度等))
- 防犯・防災システム (緊急通報・火災報知、地震速報等)
- 各社ベッドセンサー
- 空調集中管理 等

※本カタログ中の会社名、商品名は各社の商標および登録商標です。※本カタログ中の画像は一部イメージであり、また、実際の商品と色、形が異なる場合がございます。※商品は改良のため予告無く仕様変更することがございます。※本カタログに掲載の写真・デザイン・記事の転載・複製を禁じます。



株式会社 平和テクノシステム
https://heiwa-net.ne.jp/

本 社

〒410-0061 静岡県沼津市北園町3-8
TEL:055-920-0800(代) FAX:055-920-2500